



## *Geschichte der Unternehmensgruppe Deltai Medical*

*Bereits im Jahre 1918 gründete David Lu's Großvater die Triad Trading Company. Als 1952 sein Sohn Ting-fou Lu das Unternehmen übernahm, änderte er den Gegenstand des Unternehmens, das Handelsunternehmen wurde zu einem Produktionsbetrieb. Ab 1970, unter der Leitung von David Lu, entwickelte sich das Unternehmen nach und nach von dem anfänglich Kunststoff verarbeitenden Betrieb zu einer Produktion für orthopädische Produkte. Heute wird die Unternehmensgruppe in der vierten Generation von Tony Lu geleitet. Das Unternehmen Triad Orthopedic Products Industrial Co. Ltd. verfügt nun über ein Kapital von 112,6 Millionen TWD und ein Firmengelände von 9802 m<sup>2</sup>. All diese Faktoren machen die Deltai International Medical Group zu einem der führenden Unternehmen im Bereich medizinischer Produkte in Taiwan.*

*Die Deltai Medical Group wurde 1972 in Taiwan gegründet. Als professioneller Hersteller medizinischer Produkte arbeiteten wir unaufhörlich daran, das Unternehmen ständig weiterzuentwickeln. Heute zählen zu den wichtigsten Produkten der Gruppe orthopädische Produkte, Notfallprodukte, Selbstversorgungshilfen, Pflegehilfen, medizinische Kompressionsstrümpfe und -bekleidung sowie Produkte für die orthopädische Rehabilitation und Physiotherapie von Tieren.*

*Die erste Fabrik wurde 1992 auf dem chinesischen Festland errichtet unter dem Namen Deltai Medical & Health Articles (Suzhou) Co., Ltd. mit einem registrierten Kapital von 8 Millionen USD und einem Gelände von 20.000 m<sup>2</sup>. Hier werden vornehmlich orthopädische Produkte, Selbstversorgungshilfen, Pflegehilfen sowie medizinische Kompressionsartikel hergestellt.*

*Um dem immer stärker wachsenden Bestellaufkommen gerecht werden und ein noch umfassenderes Sortiment medizinischer Produkte anbieten zu können, wurde im Jahr 2001 eine weitere Produktionsstätte auf dem chinesischen Festland gegründet, die David Medical Products (Suzhou) Co., Ltd. mit einem registrierten Kapital von 10 Millionen USD und einem Firmengelände von 35000 m<sup>2</sup>. Hier werden vornehmlich Notfallprodukte und orthopädische Produkte hergestellt, das umfassendste Sortiment an Notfallprodukten in China.*

*Die Hauptzentrale für das Geschäft in China wurde 2011 als Deltai Medical Group Office of China Business in Taicang, China, eröffnet.*

*Aufgrund der weiterhin steigenden Nachfrage, Produktvarianten und der Erweiterung des Sortiments investierte die Deltai Medical Group in 2011 in ein drittes Werk auf dem chinesischen Festland, namentlich Deltai Medical Products (Chuzhou) Co., Ltd. mit einem registrierten Kapital von 12 Millionen USD und einem Betriebsgelände von 56300 m<sup>2</sup>, hauptsächlich für die Produktion orthopädischer Produkte.*

*Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, für eine bessere Kommunikation und ein besseres Produktionsmanagement zwischen den beiden Produktionsstätten wurden Deltai Medical und David Medical in 2012 zusammengeschlossen nach Ratifizierung durch die regionalen Behörden und entsprechend in Deltai Medical & Health Articles (Suzhou) Co., Ltd. - Deltai Medical Plant und Deltai Medical & Health Articles (Suzhou) Co., Ltd. - David Medical Plant umbenannt. Das registrierte Kapital beträgt 18 Millionen USD. Wir sind ISO 9001:2008 und ISO 13485:2012 zertifiziert und verfügen bereits über Registrierungszertifikate für medizinische Produkte in über 100 Produktvarianten.*

*Der Hauptsitz der Deltai Medical Group Head Office wurde 2012 nach Tainan, Taiwan verlegt und umfasst 1584 m<sup>2</sup>.*

*Bei Deltai haben wir einen klaren Fokus und stehen mit Überzeugung für unsere Werte ein: Qualität, Service und Professionalität. Vom innovativen Design über die Auswahl feinsten Materialien bis hin zu den höchsten Qualitätskontrollen, jeder Schritt ist darauf ausgelegt, Ihnen die besten Produkte zu bieten, damit Sie Ihre Kunden zufrieden stellen können. Wir weisen das weltweit umfangreichste Produktsortiment auf, und das bei einer hohen Eigenproduktionskapazität. Wir besitzen über 1000 verschiedene Produkte. In unserem Lager befinden sich über 3000 Rohstoffe im Wert von über 12 Millionen. Auf dieser Grundlage können wir Ihren Bedarf in kürzester Zeit decken. Außerdem sorgen wir für eine schnelle und sichere Lieferung Ihrer Bestellungen. All diese Qualitäten machen die Deltai Medical Group zu einem international bekannten, in Asien führenden, erstklassigen Unternehmen.*

*Wir verfügen über die folgenden Einrichtungen:*

- 1. Anlage zum Laminieren, Stanzen, Trimmen, Schneiden sowie automatischer Zuschneidetische*
- 2. Hohlformherstellung, Extruder, verschiedene Kunststoffspritzanlagen, Silikonspritz, PU-Spritz, Spritzguss, Blasformung, Vakuumformung, Heißdruckformung und Kaltdruckformung*
- 3. Produktionsanlage für Silikonprodukte und Schienmaterialien*
- 4. Textilanlagen mit über 100 Maschinen aus dem In- und Ausland, einschließlich Strickmaschinen aus der Schweiz, Deutschland und Italien für medizinische Zwecke.*
- 5. Alle Gerätschaften, über die ein Werkzeug- und Metallverarbeitungszentrum verfügen sollte (z. B. Drahtschneidemaschinen, elektroerosive Metallbearbeitung, Schleifmaschinen, Fräser, CNC-gesteuerte Fräser, Drehmaschinen, CNC-gesteuerte Drehmaschinen, Radialbohrer, Vertikalbohrer, CNC-Wasserstrahlschneider, Sägemaschinen, 3D-Drucker, 3D-Scanner usw.*
- 6. CAD, CAM, CAE-Systeme*
- 7. Anlage für orthopädische Weichprodukte*
- 8. Anlage für orthopädische Schuhe*
- 9. Anlage für Notfallprodukte*
- 10. Selbstversorgungshilfen und Pflegehilfen*
- 11. Produkte für die orthopädische und medizinische Versorgung von Tieren*

*Die Deltai Medical Group ist ein Familienunternehmen, das von dem derzeitigen President, David Lu, aufgebaut wurde. Heute wird das Unternehmen von Vice President Tony Lu und General Manager Jack Lu geführt.*

*Qualität Service Professionalität*

**Alle Arten von orthopädischen Produkten, CPM, Kompressionsstrümpfen und -bekleidungsstücken, orthopädische Reha- und Physiotherapieprodukte für Tiere. Deltai Medical Group ist einer der international bekanntesten Großproduzenten im Bereich medizinischer Produkte.**

### **Hauptsitz in Taiwan (Taiwan)**

Seit 1972 in Taiwan



Bürogebäude (5. Etage):  
1584 m<sup>2</sup>

### **Büro für das China-Geschäft (Taicang China)**

Seit 2007 in China

Bürogebäude: 5300 m<sup>2</sup>



### **Triad Orthopedic Products Industrial Co., Ltd. (Taiwan)**

Seit 1918 in Taiwan

Produktionsstätte: 9802 m<sup>2</sup>

FDA(USA) Registrierung: 3009762043



### **Deltai Medical & Health Articles (Suzhou) Co., Ltd. (Taicang China)**

Seit 1972 in Taiwan, Seit 1992 in China

Produktionsstätte: 20000 m<sup>2</sup>

FDA (USA) Registrierung: 9616984




### **Deltai Medical & Health Articles (Suzhou) Co., Ltd. David Medical Plant (Taicang China)**

Seit 2001 in China

Produktionsstätte: 35000 m<sup>2</sup>

FDA(USA) Registrierung: 9616984

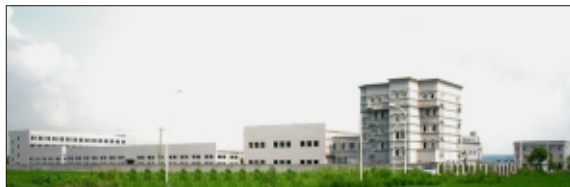

### **Deltai Medical Products (Chuzhou) Co., Ltd (Chuzhou China)**

Seit 2011 in China

Produktionsstätte: 56300 m<sup>2</sup>

FDA(USA) Registrierung: 3010391334



TUV ISO 9001:2015  
CERTIFICATED  
No.: 12 100 37156 TMS



TUV ISO 13485:2016  
CERTIFICATED  
No.: Q5 070715 0004 Rev.00



TUV ISO 9001:2015  
CERTIFICATED  
No.: 12 100 54663 TMS



TUV ISO 13485:2012  
CERTIFICATED  
No.: Q2N 17 07 98932 001



TUV ISO 9001:2015  
CERTIFICATED  
No.: TUV100 02 3479




VERSION 2015



VERSION 2016

Sehr geehrte Kunden,

Die Menschen möchten Weltfrieden, keine Kriege erleben müssen, in gegenseitigem Respekt leben und einander lieben. Darüber hinaus ist es gleichermaßen wichtig, in Harmonie mit der Natur zu leben. Tiere sind der Menschen engste Freunde. Wir sollten Tiere lieben und ihre Leben wertschätzen.


Die Behandlung mit und der Einsatz von Reha- und Physiotherapieprodukten bei menschlichen Beschwerden des Bewegungsapparates sind universell verbreitet und etabliert. Die IAVRPT (International Association of Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy) wurde im Juli 2008 gegründet. Ab diesem Zeitpunkt gab es für Tiermediziner weltweit erstmalig die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und zu kooperieren. 2010 hielt die VEPR (Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association) erstmalig eine Konferenz für fachlichen Austausch und Zusammenarbeit ab, in deren Folge in Amerika die AARV (American Association of Rehabilitation Veterinarians) gegründet wurde. Endlich hatten Veterinärmediziner die Möglichkeit des Informationsaustauschs, zur Entwicklung, Ausbildung und zum Ausprobieren von Tierprodukten, was dazu führte, dass die europäischen und amerikanischen Märkte wuchsen und reiften. Im Vergleich dazu liegt die Entwicklung von Tierprodukten in den asiatischen Ländern noch in den Anfängen. Wir von der Deltai Group als weltweit bekannter Hersteller für orthopädische Produkte sind gewillt, unseren Teil dazu beizutragen, dass Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung im Bereich der Reha- und Physioproducte für Tiere vorangetrieben werden, sodass wir zum ersten professionellen Entwickler und Hersteller von Tierprodukten in Asien avancieren. Die Deltai Medical Group begann bereits 1972 mit der Forschung und Entwicklung humanmedizinischer orthopädischer Produkte. Nach Jahrzehnten der Entwicklung verfügen wir nun über fortschrittliche Technologien, einen reichen Erfahrungsschatz und ein fundiertes Wissen über den menschlichen Körper. Wir sind bereit und in der Lage, diese Kenntnisse für unsere tiertherapeutischen Produkte einzusetzen. Triad Orthopedic Products Industrial Co., Ltd wurde 1918 gegründet. Als Mitglied der Deltai Medical Gruppe ist das Unternehmen seit 2014 für den Bereich Tierorthopädie verantwortlich. Auf Grundlage der Forschungsergebnisse startet die Produktion in den angeschlossenen Werken in Taiwan und auf dem chinesischen Festland, um die Lücke mit tiertherapeutischen Produkten für Hunde, Katzen und Pferde in Asien zu schließen. Wir vertreiben Tierprodukte unter unserer Eigenmarke  in der ganzen Welt und sind überzeugt, dass unsere professionellen Produkte Sie überzeugen werden. Für unsere Innovationen und qualitativ hochwertigen Produkte wurden wir vielfach gelobt. Wir freuen uns sehr, wenn unsere qualifizierten und ausgezeichneten Mitarbeiter auch Sie überzeugen können.

Professionellen Rat von Veterinärmedizinerinnen im In- und Ausland nehmen wir sehr gern entgegen. Eine weitere Zusammenarbeit an neuen Techniken und Produkten ist ebenfalls möglich, wenn Sie interessiert sind. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer Website: [www.triad-orthopedic.com](http://www.triad-orthopedic.com). Produkte, die mit  und  gekennzeichnet sind, sind für Hunde und Katzen. Mit  markierte Produkte sind für Pferde.

**Wenn Sie Tierarzt sind, wenden Sie sich bitte an die jeweilige Vertretung in Ihrem Land oder senden Sie eine E-Mail an unseren Hauptsitz in Taiwan (E-Mail: [export@deltagroup.com.tw](mailto:export@deltagroup.com.tw) Tel: +886-6-2682277). Wenn Sie Tierbesitzer sind, wenden Sie sich bitte an eine Tierklinik in Ihrer Nähe, um unsere Produkte zu beziehen. Leider vertreiben wir nicht an Tierbesitzer direkt. Für den Einsatz unserer Produkte ist das ordnungsgemäße Vermessen und Anpassen, sowie die Auswahl der korrekten Größe auf Basis der Angaben in unserem Katalog durch einen Tiermediziner unerlässlich.**

Wenn Sie Interesse haben, unsere Produkte in Ihrem Land an lokale Tiermediziner zu vertreiben, kontaktieren Sie uns. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit.

Deltai Medical Group

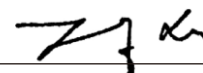

Vice President Tony Lu

*Qualität Service Professionalität*

# Hauptprodukte

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Orthopädische Rehabilitationsprodukte für Hunde und Katzen</b>	
Ohrenbinde, Cervicalstütze	3
Hebehilfe, Gehhilfe, Schwimmweste	4-7
Schulterorthese, Hüftorthese	8-11
Ellbogenorthese / -schiene, Knieorthese / -schiene, anpassbare Ellbogen-/Knieschiene	12-14
Karpal-Walker/-Schiene, Tarsal-Walker/-Schiene	15-19
Anbiegbare Karpal-/Tarsalorthese, elastische Pfortenschlaufe	20-22
Dorsi-Flex Assist, Orthese mit Rädern	22-23
Vorderlauf-/Hinterlaufprothese	24-25
Schuhe	26-27
Gehhilfe (Rollstuhl)	28-30
<b>Tierklinikzubehör</b>	31
<b>Physiotherapeutische Produkte</b>	
Physio-Ball, Pforten-Trainer	32-33
Rollbrett, Schaukelbrett	34
Agility-Trainings-Kit, Trainingshilfe, Kalt-/Heißkompressen, Gewichtsweste / Kompressen	35-36
<b>Orthopädische Rehaprodukte für Pferde</b>	
Fliegenhaube, Halskrause, Pferdendecken, Schabracken	38
Sprunggelenkskompressen	38-39
Gamaschen, Streichkappen, Hufglocken	39-41
<b>Einkaufs- und Gebrauchsinformation für Tierärzte</b>	42


# Hunderassen:

A	E	F	H	I
Chihuahua Chinesischer Schopfhund Malteser Toy Pudel	American Eskimo Australischer Terrier Bichon Frise Border Collie Border Terrier Boston Terrier Bull Terrier(Mini) Cairn Terrier Französische Bulldogge Havanese Irish Terrier Jack Russell Terrier Lakeland Terrier Lhasa Apso Manchester Terrier Norfolk Terrier Parson Jack Russell Terrier Pembroke Welsh Corgi Petit Basset Griffon Pudel Mops Sealyham Terrier Shetland Sheepdog Shiba Inu Shitzu Silky Terrier Skye Terrier Glatthaar-Foxterrier Schnauzer(Mini) West Highland White Terrier Wire Fox Terrier	Beagle Shar-Pei Cocker Spaniel	Bulldog	Airedale Basset Hound Bearded Collie Bluthund Irischer Wolfshund Kerry Blue Terrier Labrador Retriever Puli Rottweiler
B		G		J
Brüsseler Griffon Cavalier King Charles - Spaniel Dachshund Italienisches Windspiel Zwergpinscher Papillion Pekinese Zwergspitz Toy Fox Terrier		Afghane Akita Alaskan Malamute American Stafford Terrier American Water Spaniel Basenji Malinois Boxer Brittany Bull Terrier(Standard) Welsh Corgi Cardigan Chow Chow Collie Dalmatiner Dandie Dinmont Terrier Dobermann English Cocker Spaniel English Foxhound English Springer Spaniel Field Spaniel Deutscher Pinscher	Deutscher Schäferhund Golden Retriever Greyhound Irish Setter Lowchen Nova Scotia Duck - Tolling Retriever Pit Bull Pudel (Standard) Portugiesischer Wasserhund Rhodesian Ridgeback Soft Coated Wheaten Schnauzer(Standard) Scottish Terrier Terrier Staffordshire Bull Terrier Schwedischer Vallhund Tibet-Terrier Welsh Springer Spaniel Weimaraner Whippet	Berner Sennenhund
C				K
American Spitz (Eskie) Japan Chin Schipperke				King Charles Spaniel Deutsche Dogge Pyrenäenberghund Mastiff Neufundländer Bobtail Riesenschnauzer Bernardiner
D				
King Charles Spaniel				

Oben sehen Sie eine Liste verschiedener Hunderassen, eingeteilt in 11 Kategorien je nach Hundart. Die Rassen in Kategorie B sind größer als A und kleiner als C. Der Rest ist auf dieselbe Weise sortiert, A<B<C<D<E<F<G<H<I<J<K.  
A, B, C, D: kleine Hunde    E, F, G, H: mittelgroße Hunde    I, J, K: große Hunde

Um die passende Größe für Ihren Hund zu finden, nehmen Sie bitte entsprechend Maß und orientieren Sie sich an den von uns angegebenen Größen.

# Anatomie Hund:

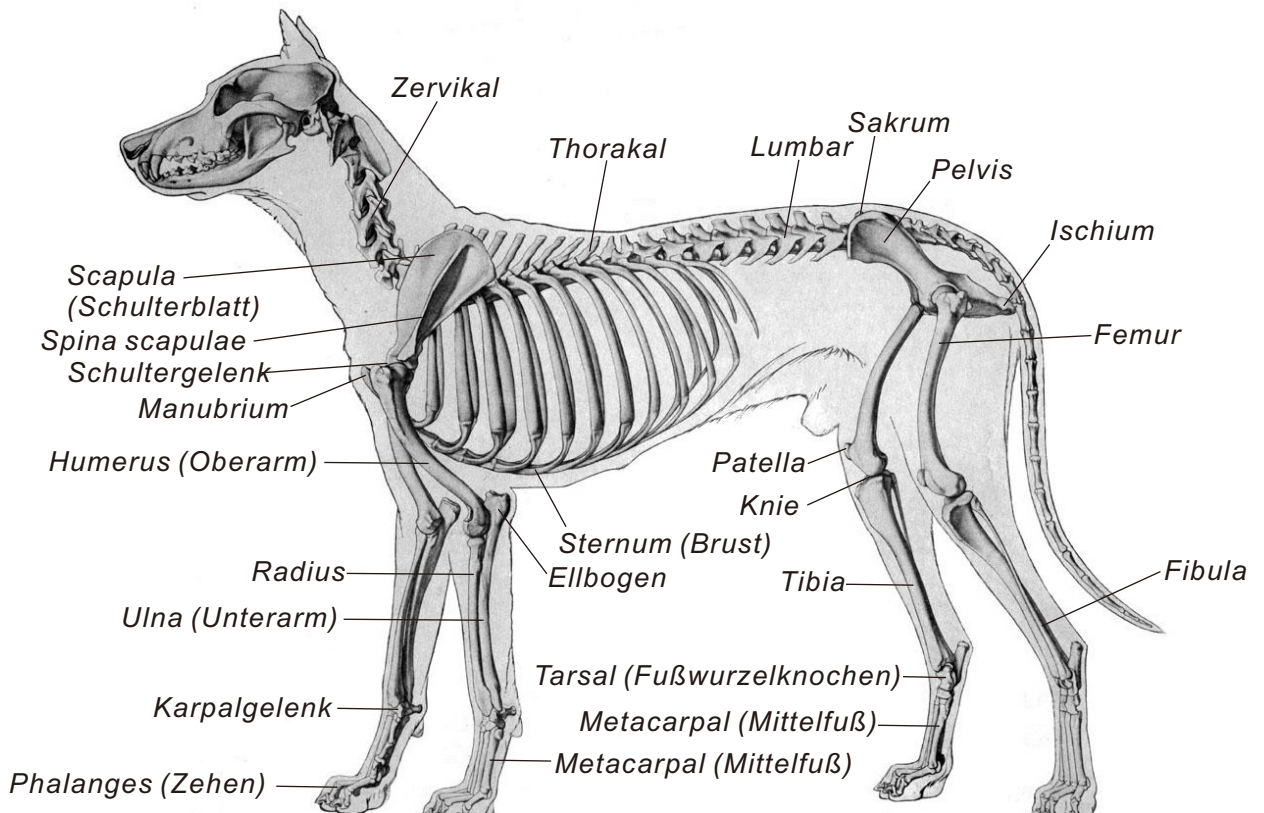


## Katzenrassen (nach CFS -Standard):

A	B		C
Singapura Cornish Rex Orientalisch	Siamkatze Scottish Fold Britisch Kurzhaar Perserkatze Russisch Blau, Exotisch Kurzhaar Norwegische Waldkatze Ägyptische Mau Burmakatze Kanadische Sphinx Burmilla Abessinier Türkische Van Amerikanische Bobtail	Japanische Bobtail Balinese Ragamuffin Tonkanese Cornish Rex Manx Ozelotkatze Devon Rex American Wirehair Havana Brown Colorpoint Shorthair Selkirk Rex American Curl	Ragdoll Britisch Kurzhaar Perserkatze American Shorthair Chartreux

Oben sehen Sie eine Liste verschiedener Katzenrassen, eingeteilt in drei Kategorien je nach Katzenart. Die Katzen der Kategorie B sind größer als die der Kategorie A und kleiner als jene der Kategorie C. Es gilt also  $A < B < C$ .

Um die passende Größe für Ihre Katze auszuwählen, vermessen Sie die Katze entsprechend und wählen Sie anhand der angegebenen Größenangaben aus.

## Anatomie der Katze:

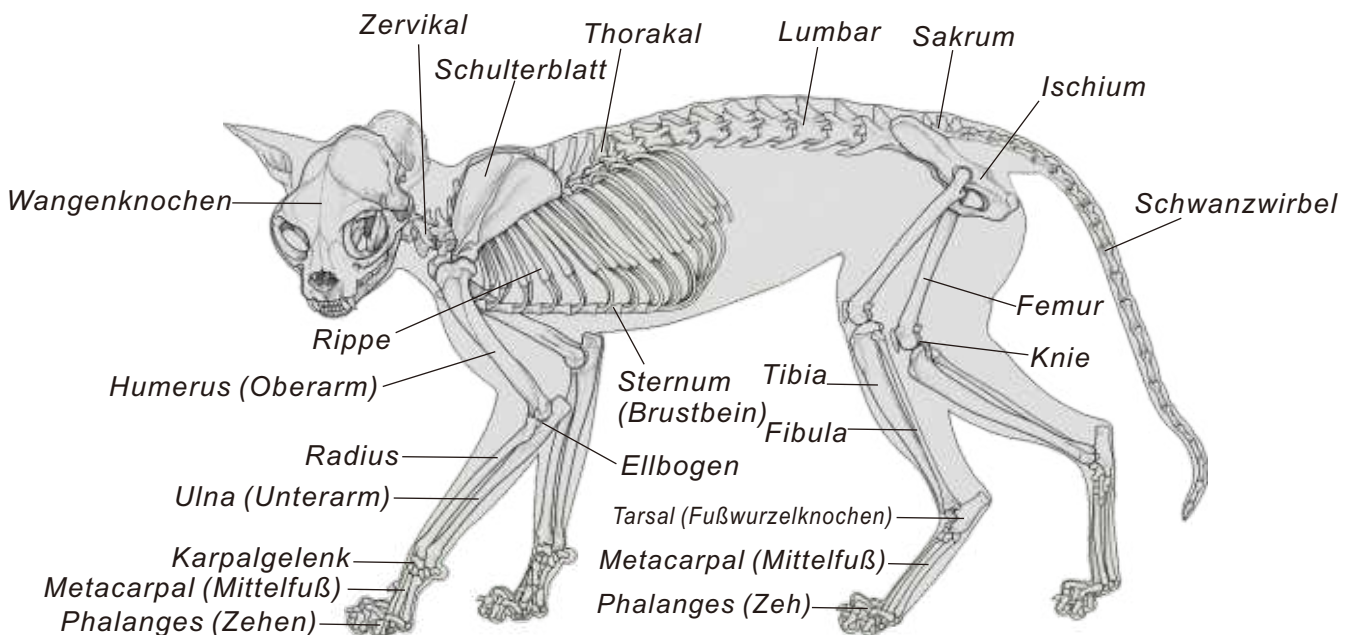




**Kompressions-Ohrenbinde**



- .Hält das Ohr nach Operationen auch bei Kopfschütteln flach am Kopf.
- .Bei totaler Ohrkanalablation.
- .Verhindert das Fortspritzen der Medikation nach Verabreichung.
- .Bei Wunden, Abrasionen, Inzisionen an den oder um die Ohren.
- .Verhindert das Eindringen von Futterresten in das Ohrenfell bzw. in den Ohrenkanal.
- .Stoppt Blutungen.
- .Reduziert bakterielle Infektionen.
- .Hergestellt aus atmungsaktivem Thermomaterial.

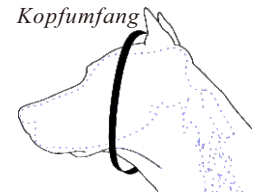


Art.Nr.	Größe	Kopfumfang	Art.Nr.	Größe	Kopfumfang
mittelgroße Hunde			kleine Hunde, Katzen		
T-04103	S	32-39cm	T-04113	S	18-25cm
T-04105	M	39-46cm	T-04115	M	21-28cm
T-04107	L	46-53cm	T-04117	L	28-35cm



**Cervicalstütze**



- .Zür Tiere zur Genesung nach Bandscheibenvorfall und zervikaler Arthritis.
- .Schützt die verletzte Halswirbelsäule, immobilisiert und unterstützt diese in der Phase der postoperativen Rehabilitation.
- .Elastischer Schaumstoff sorgt für starken Halt und angenehmen Tragekomfort.
- .Anpassung an den Halsumfang durch Klettverschluss.

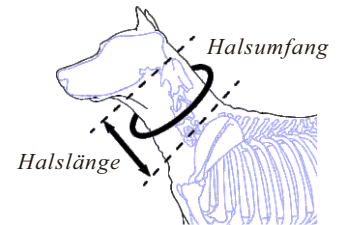


Art.Nr.	Größe	Halslänge	Halsumfang	Art.Nr.	Größe	Halslänge	Halsumfang
mittelgroße Hunde				kleine Hunde, Katzen			
T-05103	S	8cm	30-35cm	T-05112	XS	5cm	18-22cm
T-05104	S/M	8cm	33-39cm	T-05113	S	6cm	21-25cm
T-05105	M	10cm	33-39cm	T-05115	M	7cm	24-28cm
T-05106	M/L	10cm	37-43cm	T-05117	L	8cm	27-31cm
T-05107	L	12cm	37-43cm				
T-05108	XL	14cm	41-47cm				



**Anbiegbare Cervicalstütze**



- .Zür Tiere zur Genesung nach Dislokation oder Fraktur der Halswirbelsäule, Bandscheibenvorfall, zervikaler Arthritis oder postoperativer Rehabilitation.
- .Schützt die verletzte Halswirbelsäule, immobilisiert und unterstützt diese in der Phase der postoperativen Rehabilitation.
- .Plastikplatte innen und atmungsaktives Abstandsgewirk außen sorgen für Stabilität und angenehmes Tragen.
- .Riemen mit Schnallen zur Anpassung an den Halsumfang.

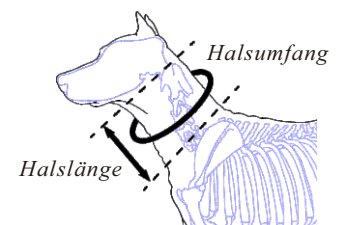

Art.Nr.	Größe	Halslänge	Halsumfang	Art.Nr.	Größe	Halslänge	Halsumfang
mittelgroße Hunde				kleine Hunde, Katzen			
T-06103	S	8cm	30-36cm	T-06112	XS	5cm	18-23cm
T-06104	S/M	8cm	33-40cm	T-06113	S	6cm	21-26cm
T-06105	M	10cm	33-40cm	T-06115	M	7cm	24-29cm
T-06106	M/L	10cm	37-45cm	T-06117	L	8cm	27-32cm
T-06107	L	12cm	37-45cm				
T-06108	XL	14cm	41-50cm				






### Leinengestützter Reha-Rumpfgurt

- .Fixationsleibgurt für Hunde bei Verletzungen des Brustkorbs und der Brusthöhle.
- .Zum Fixieren und Unterstützen des Brustkorbs, der Brustwirbel und Brusthöhle und Schmerzlinderung.
- .Eine biegsame Platte innen und atmungsaktives Abstandsgewirk außen passen sich der Brustkontur des Hundes an und bieten damit einen widerstandsfähigen Schutz für den Brustbereich.
- .Hunde mit Vorderlaufschwäche können angehoben werden, sodass Bänder und Sehnen entlastet werden.

Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Oberarmumfang	Belastbarkeit	Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Oberarmumfang	Belastbarkeit
<i>mittelgroße Hunde</i>					<i>kleine Hunde</i>				
T-10013	S	50-56cm	21-24cm	20kg	T-10112	XS	30-34cm	8-11cm	10kg
T-10014	S/M	57-63cm	24-27cm	30kg	T-10113	S	35-39cm	12-15cm	10kg
T-10015	M	64-71cm	27-31cm	50kg	T-10115	M	40-44cm	16-19cm	15kg
T-10016	M/L	72-80cm	31-35cm	70kg	T-10117	L	45-50cm	19-22cm	20kg
T-10017	L	81-90cm	35-40cm	80kg					
T-10018	XL	90-100cm	40-45cm	80kg					

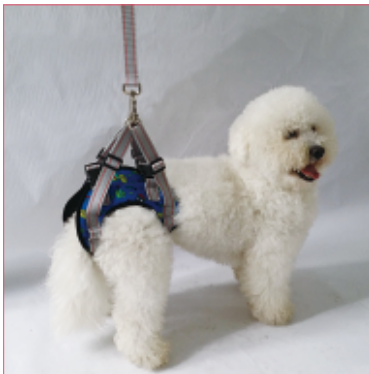

### Leinengestützter Reha-Hüftgurt

- .Fixationsleibgurt für Hunde bei Verletzungen des Beckens und Kreuzbeins.
- .Hält Becken und Hüftgelenk warm und wirkt schmerzlindernd.
- .Aus atmungsaktivem Abstandsgewirk, an die Hüftkontur angepasstes Design für angenehmen Tragekomfort.
- .Hebegurt stützt Hunde mit unkoordinierten Bewegungen oder Muskelschwäche aufgrund von Hüftdysplasie oder Osteoarthritis.

Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang	Belastbarkeit	Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang	Bearing weight
<i>mittelgroße Hunde</i>					<i>kleine Hunde</i>				
T-11013	S	38-47cm	22-28cm	30kg	T-11112	XS	28-32cm	9-13cm	10kg
T-11015	M	48-59cm	28-36cm	50kg	T-11113	S	30-34cm	13-17cm	10kg
T-11017	L	60-72cm	36-44cm	70kg	T-11115	M	32-36cm	16-20cm	15kg
T-11018	XL	73-85cm	44-52cm	80kg	T-11117	L	34-38cm	20-25cm	20kg



### Leinengestützter Thermo-Rumpfgurt

- .Thermo-Mantel für Hunde bei Verletzungen des Brustkorbs und der Brusthöhle.
- .Wärmend, weich und atmungsaktiv, schnelles Schließen und Öffnen durch Schnallgurt.
- .Hunde mit Vorderlaufschwäche können angehoben werden, sodass Bänder und Sehnen entlastet werden.
- .Schützt die glenohumeralen Bänder, das Tier kann nach Operationen leichter die Balance halten, unterstützt die Genesung.

Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Oberarmumfang	Belastbarkeit	Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Oberarmumfang	Belastbarkeit
<i>mittelgroße Hunde</i>					<i>kleine Hunde</i>				
T-12013	S	50-61cm	21-26cm	30kg	T-12112	XS	30-34cm	8-11cm	10kg
T-12015	M	62-74cm	27-32cm	50kg	T-12113	S	35-39cm	12-15cm	10kg
T-12017	L	75-87cm	33-39cm	70kg	T-12115	M	40-44cm	16-19cm	15kg
T-12018	XL	88-100cm	39-45cm	80kg	T-12117	L	45-50cm	19-22cm	20kg



### Leinengestützter Thermo-Hüftgurt



.Wärmender Leibgurt für Hunde bei Verletzungen des Beckens und Kreuzbeins.  
 .Wärmend, weich und aktmungsaktiv, schnelles Schließen und Öffnen durch Schnallgurt.  
 .Hebegurt stützt Hunde mit unkoordinierten Bewegungen oder Muskelschwäche aufgrund von Hüftdysplasie oder Osteoarthritis.  
 .Schützt die Hüfte, das Tier kann nach der Operation besser die Balance halten, unterstützt die Genesung.

Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang	Belastbarkeit	Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang	Belastbarkeit
<i>mittelgroße Hunde</i>					<i>kleine Hunde</i>				
T-13013	S	38-47cm	22-28cm	30kg	T-13112	XS	28-32cm	9-13cm	10kg
T-13015	M	48-59cm	28-36cm	50kg	T-13113	S	30-34cm	13-17cm	10kg
T-13017	L	60-72cm	36-44cm	70kg	T-13115	M	32-36cm	16-20cm	15kg
T-13018	XL	73-85cm	44-52cm	80kg	T-13117	L	34-38cm	20-25cm	20kg




### Reha-Ganzkörperweste mit Haltegriffen



.Fixationshilfe für Hunde in Rehabilitation nach Verletzungen des Brustkorbs, der Brusthöhle sowie der Brust- und Lendenwirbelsäule.  
 .Biegsame Kunststoffplatte passt sich an die Brust- und Bauchkontur des Hundes an und ist damit ein widerstandsfähiger Schutz für Brust- und Lendenwirbelsäule und Brustkorb.  
 .Zum Anheben von Hunden mit Laufschwäche, zur Gewichtsentlastung der Bänder und Sehnen.

Art.Nr.	Größe	Körperlänge	Brustumfang	Belastbarkeit	Art.Nr.	Größe	Körperlänge	Brustumfang	Belastbarkeit
<i>mittelgroße Hunde</i>					<i>kleine Hunde</i>				
T-14013	S	41-47cm	50-61cm	30kg	T-14112	XS	25-29cm	30-34cm	10kg
T-14015	M	48-55cm	62-74cm	50kg	T-14113	S	29-33cm	35-39cm	10kg
T-14017	L	56-64cm	75-87cm	70kg	T-14115	M	33-37cm	40-44cm	15kg
T-14018	XL	65-75cm	88-100cm	80kg	T-14117	L	37-41cm	45-50cm	20kg

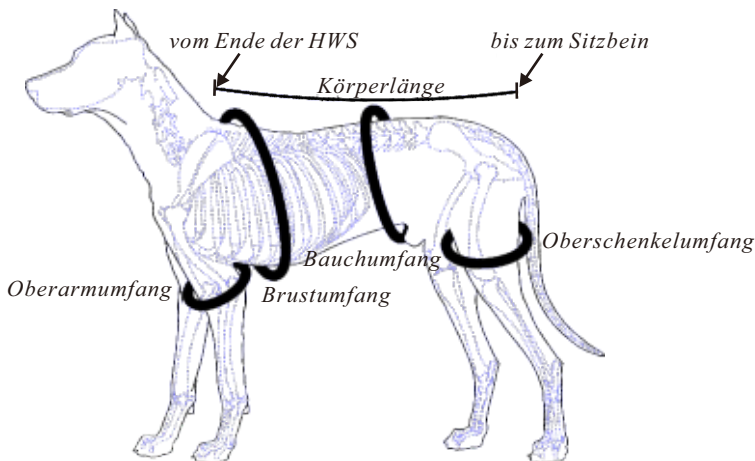

Maßabnahme





kleine Hunde

### Leinengestütztes Laufhilfegeschrir



.Unterstützt Hunde mit schwacher Hüfte beim Gehen, sorgt für Muskelentlastung.  
.Zum Schutz der Schulter- und Hüftgelenksbänder durch Gewichtsentlastung.  
.Atmungsaktives Innenfutter, farbenfrohes Außenmaterial.



mittelgroße Hunde


### Laufhilfegeschrir mit Tragegriff



.Unterstützt Hunde mit schwacher Hüfte beim Gehen, sorgt für Muskelentlastung.  
.Zum Schutz der Schulter- und Hüftgelenksbänder durch Gewichtsentlastung.  
.Atmungsaktives Innenfutter, wärmend durch angerautes Material.  
.Mit strapazierfähigem Tragegriff ausgestattet.

Art.Nr.	Größe	Körperlänge	Brustumfang	Belastbarkeit
<b>kleine Hunde</b>				
T-16112	XS	25-29cm	30-34cm	10kg
T-16113	S	29-33cm	35-39cm	10kg
T-16115	M	33-37cm	40-44cm	15kg
T-16117	L	37-41cm	45-49cm	20kg
T-16118	XL	41-45cm	48-59cm	30kg

Art.Nr.	Größe	Körperlänge	Brustumfang	Belastbarkeit
<b>mittelgroße Hunde</b>				
T-16213	S	41-47cm	50-61cm	30kg
T-16215	M	48-55cm	62-74cm	50kg
T-16217	L	56-64cm	75-87cm	70kg
T-16218	XL	65-75cm	88-100cm	80kg

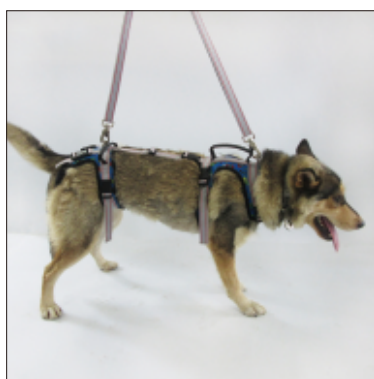

### Leinengestütztes Laufhilfegeschrir



.Unterstützt Hunde mit schwacher Hüfte oder Läufen beim Laufen.  
.Für Hunde mit Bänderverletzungen.  
.Zum Schutz der Schulter- und Hüftgelenksbänder durch Gewichtsentlastung.  
.Schnallen ermöglichen schnelles An- und Ausziehen.  
.U-Design am Hinterteil erleichtert die Ausscheidung.

Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Bauchumfang	Belastbarkeit
<b>mittelgroße Hunde</b>				
T-16313	S	50-70cm	40-55cm	30kg
T-16315	M	60-80cm	50-65cm	50kg
T-16317	L	70-90cm	60-75cm	70kg
T-16318	XL	80-100cm	70-85cm	80kg



### Schwimmweste mit Haltegriff



.Aus schwimmfähigem Material, um dem Hund beim Schwimmen zu unterstützen.  
.Ummantelte Schnallenverschlüsse an Hals und Bauch für maximale Sicherheit.  
.Bessere Sichtbarkeit zur Positionierung des Hundes durch reflektierende Streifen.  
.Wärmend bei längeren Übungen im Wasser.

Art.Nr.	Größe	Körperlänge	Brustumfang	Belastbarkeit
<b>mittelgroße Hunde</b>				
T-17013	S	40-45cm	50-56cm	10kg
T-17014	S/M	45-50cm	57-63cm	20kg
T-17015	M	50-56cm	64-71cm	30kg
T-17016	M/L	56-62cm	72-80cm	30kg
T-17017	L	62-68cm	81-90cm	40kg
T-17018	XL	68-75cm	90-100cm	50kg

Art.Nr.	Größe	Körperlänge	Brustumfang	Belastbarkeit
<b>kleine Hunde</b>				
T-17112	XS	25-29cm	30-34cm	10kg
T-17113	S	29-33cm	35-39cm	10kg
T-17115	M	33-37cm	40-44cm	15kg
T-17117	L	37-41cm	45-50cm	20kg



*mittelgroße Hunde*



*kleine Hunde, Katzen*



*kleine Hunde, Katzen*

Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Oberarmumfang
<b>mittelgroße Hunde</b>			
<i>links</i>	<i>rechts</i>		
T-18013	T-18023	S	40-54cm
T-18015	T-18025	M	54-78cm
T-18017	T-18027	L	78-107cm
Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Oberarmumfang
<b>kleine Hunde, Katzen</b>			
<i>links</i>	<i>rechts</i>		
T-18112	T-18122	XS	32-36cm
T-18113	T-18123	S	34-38cm
T-18115	T-18125	M	36-40cm
T-18117	T-18127	L	38-46cm

### Einstellbare Schultergelenksorthese

- .Unterstützende Schiene bei Parese des Vorderlaufs, Schulterarthritis, Dislokation des Schultergelenks, Rehabilitation von Humerus-Frakturen und Schultergelenksverletzungen.
- .Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung von Humerus und Scapula in einem gewünschten Winkel.
- .Biegsame innere Kunststoffplatte am Oberlauf ermöglicht starke Fixierung an den Humerus.
- .Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.



*mittelgroße Hunde*





*kleine Hunde, Katzen*

### Einstellbare, beidseitige Schultergelenksorthese

- .Unterstützende Schiene bei Parese des Vorderlaufs, Schulterarthritis, Dislokation des Schultergelenks, Rehabilitation von Humerus-Frakturen und Schultergelenksverletzungen.
- .Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung von Humerus und Scapula in einem gewünschten Winkel.
- .Biegsame innere Kunststoffplatte an den Oberläufen ermöglicht starke Fixierung an den Humerus, atmungsaktives Futter ermöglicht eine gute Luftzirkulation selbst in heißen Sommern, bessere Genesung.
- .Schiene auf beiden Seiten, die je nach Bedarfe eingesetzt werden können.
- .Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.

Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Oberarmumfang
<b>mittelgroße Hunde</b>			
T-18053	S	40-54cm	20-24cm
T-18055	M	54-78cm	24-28cm
T-18057	L	78-107cm	28-32cm

Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Oberarmumfang
<b>kleine Hunde, Katzen</b>			
T-18152	XS	32-36cm	8-11cm
T-18153	S	34-38cm	11-14cm
T-18155	M	36-40cm	14-17cm
T-18157	L	38-46cm	17-20cm

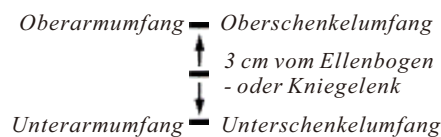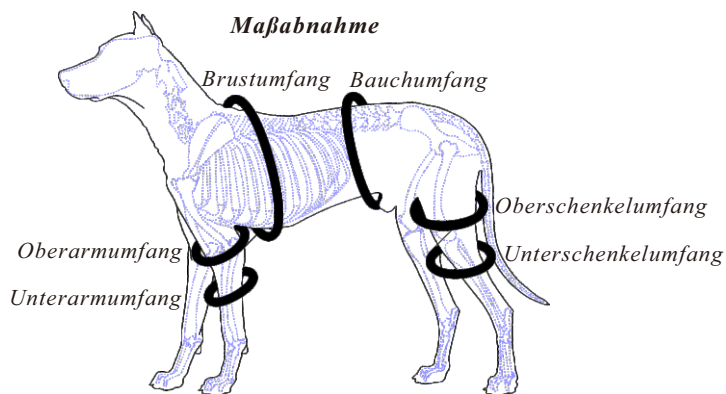

Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China



*mittelgroße Hunde*

Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China



*kleine Hunde, Katzen*

### Einstellbare Orthese Schulter-zu-Karpalgelenk



- .Unterstützende Schiene bei Parese des Vorderfußes, Dislokation des Schultergelenks, Korrektur von Vorderfußdeformitäten.
- .Unterstützende Schiene zur Rehabilitation bei Schulter-, Ellbogen- und Karpalgelenkverletzungen sowie Humerus- und Vorderlaufverletzungen.
- .Einstellbares Gelenk ermöglicht eine Fixierung und Stützung des Vorderlaufs in den gewünschten Winkeln entsprechend dem jeweiligen Genesungsfortschritt.
- .Biigsame innere Kunststoffplatte an den Oberläufen ermöglicht starke Fixierung an den Humerus, atmungsaktives Futter ermöglicht eine gute Luftzirkulation selbst in heißen Sommern, bessere Genesung.
- .Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.
- .Bei den Artikeln T-18132 XS & T-18142 XS, für kleine Hunde und Katzen, Länge aufgrund der kleinen Maße nicht einstellbar.

Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Oberarmumfang	Unterarmumfang
<i>mittelgroße Hunde</i>				
	links	rechts		
T-18033	T-18043	S	40-54cm	20-24cm 12-14cm
T-18035	T-18045	M	54-78cm	24-28cm 14-16cm
T-18037	T-18047	L	78-107cm	28-32cm 16-20cm

Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Oberarmumfang	Unterarmumfang
<i>kleine Hunde, Katzen</i>				
	links	rechts		
T-18132	T-18142	XS	32-36cm	8-11cm 6-8cm
T-18133	T-18143	S	34-38cm	11-14cm 7-9cm
T-18135	T-18145	M	36-40cm	14-17cm 8-10cm
T-18137	T-18147	L	38-46cm	17-20cm 10-12cm

Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China



*mittelgroße Hunde*

Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China



*kleine Hunde, Katzen*

### Einstellbare beidseitige Orthese Schulter-zu-Karpalgelenk




- .Unterstützende Schiene bei Parese des Vorderfußes, Dislokation des Schultergelenks, Korrektur von Vorderfußdeformitäten.
- .Unterstützende Schiene zur Rehabilitation bei Schulter-, Ellbogen- und Karpalgelenkverletzungen sowie Humerus- und Vorderlaufverletzungen.
- .Einstellbares Gelenk ermöglicht eine Fixierung und Stützung des Vorderlaufs in den gewünschten Winkeln entsprechend dem jeweiligen Genesungsfortschritt.
- .Biigsame innere Kunststoffplatte an den Oberläufen ermöglicht starke Fixierung an den Humerus, atmungsaktives Futter ermöglicht eine gute Luftzirkulation selbst in heißen Sommern, bessere Genesung.
- .Schiene auf beiden Seiten, die je nach Bedarfe eingesetzt werden können.
- .Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.
- .Bei Artikel T-18162 XS, für kleine Hunde und Katzen, Länge aufgrund der kleinen Maße nicht einstellbar.

Code	Size	Chest girth	Upper arm girth	Forearm girth
<i>mittelgroße Hunde</i>				
T-18063	S	40-54cm	20-24cm	12-14cm
T-18065	M	54-78cm	24-28cm	14-16cm
T-18067	L	78-107cm	28-32cm	16-20cm

Code	Size	Chest girth	Upper arm girth	Forearm girth
<i>kleine Hunde, Katzen</i>				
T-18162	XS	32-36cm	8-11cm	6-8cm
T-18163	S	34-38cm	11-14cm	7-9cm
T-18165	M	36-40cm	14-17cm	8-10cm
T-18167	L	38-46cm	17-20cm	10-12cm

#### Maßabnahme

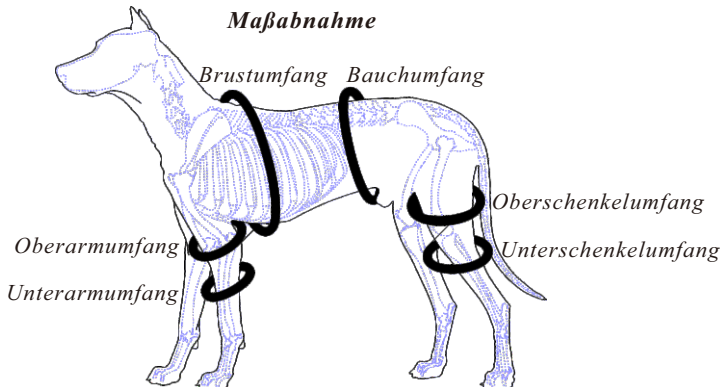

Oberarmumfang — Oberschenkelumfang  
 3 cm vom Ellenbogen - oder Kniegelenk  
 Unterarmumfang — Unterschenkelumfang



*mittelgroße Hunde*



*kleine Hunde, Katzen*

**Einstellbare Hüftgelenksorthese** 🐕 🐈

.Unterstützende Schiene bei Parese des Hinterlaufs, Hüftarthritis, Dislokation des Hüftgelenks, Rehabilitation von Femurfrakturen und Hüftgelenksverletzungen.  
 .Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung von Hüft- und Oberschenkelknochen in einem gewünschten Winkel.  
 .Biegsame Kunststoffplatte am Oberlauf ermöglicht starke Fixierung an den Oberschenkel.  
 .Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.

Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang
<i>mittelgroße Hunde</i>			
<i>links</i>	<i>rechts</i>		
T-19013	T-19023	S	38-53cm
T-19015	T-19025	M	53-68cm
T-19017	T-19027	L	68-85cm

Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
<i>links</i>	<i>rechts</i>		
T-19112	T-19122	XS	28-32cm
T-19113	T-19123	S	30-34cm
T-19115	T-19125	M	32-36cm
T-19117	T-19127	L	34-38cm



*mittelgroße Hunde*





*kleine Hunde, Katzen*

**Einstellbare beidseitige Hüftgelenksorthese** 🐕 🐈

.Unterstützende Schiene bei Parese des Hinterlaufs, Hüftarthritis, Dislokation des Hüftgelenks, Rehabilitation von Femurfrakturen und Hüftgelenksverletzungen.  
 .Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung von Hüft- und Oberschenkelknochen in einem gewünschten Winkel.  
 .Biegsame Kunststoffplatte am Oberlauf ermöglicht starke Fixierung an den Oberschenkel, atmungsaktives Futter ermöglicht Luftzirkulation selbst in heißem Wetter und trägt so zu einer schnelleren Genesung bei.  
 .Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.  
 .Ausgestattet mit Schienen für beide Beine, die je nach Bedarf optional eingesetzt werden können.

Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-19053	S	38-53cm	22-28cm
T-19055	M	53-68cm	28-36cm
T-19057	L	68-85cm	36-44cm

Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-19152	XS	28-32cm	9-13cm
T-19153	S	30-34cm	13-17cm
T-19155	M	32-36cm	16-20cm
T-19157	L	34-38cm	20-25cm

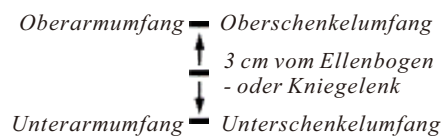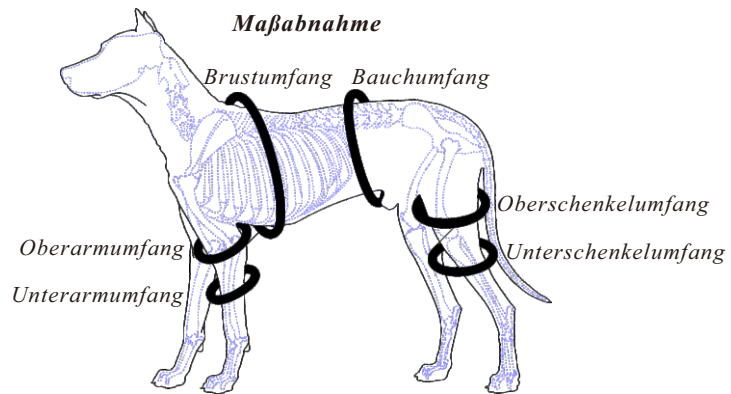

Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China



*mittelgroße Hunde*

Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China



*kleine Hunde, Katzen*

### Einstellbare Orthese Hüfte-zu-Tarsalgelenk

- .Für den Einsatz an Hüfte, Oberschenkel, Knie, Tibia, Fibula, Sprunggelenk und Mittelfuß.
- .Unterstützende Schiene bei Parese des Hinterlaufs, Hüft-, Knie- und Sprunggelenksarthritits; Dislokation des Hüftgelenks; Rehabilitation von Femurfrakturen und Hüftgelenksverletzungen.
- .Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung des Hinterlaufs in einem gewünschten Winkel.
- .Biegsame Kunststoffplatte am Oberlauf ermöglicht starke Fixierung an den Oberschenkel.
- .Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.
- .Bei den Artikeln T-19132 XS & T-19142 XS, für kleine Hunde und Katzen, Länge aufgrund der kleinen Maße nicht einstellbar.

Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang	
<i>mittelgroße Hunde</i>					
<i>links</i>	<i>rechts</i>				
T-19033	T-19043	S	38-53cm	22-28cm	10-14cm
T-19035	T-19045	M	53-68cm	28-36cm	14-19cm
T-19037	T-19047	L	68-85cm	36-44cm	19-24cm

Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang	
<i>kleine Hunde, Katzen</i>					
<i>links</i>	<i>rechts</i>				
T-19132	T-19142	XS	28-32cm	9-13cm	6-8cm
T-19133	T-19143	S	30-34cm	13-17cm	7-9cm
T-19135	T-19145	M	32-36cm	16-20cm	8-10cm
T-19137	T-19147	L	34-38cm	20-25cm	10-12cm

Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China



*mittelgroße Hunde*

Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China





*kleine Hunde, Katzen*

### Einstellbare, beidseitige Orthese Hüfte-zu-Tarsalgelenk

- .Für den Einsatz an Hüfte, Oberschenkel, Knie, Tibia, Fibula, Sprunggelenk und Mittelfuß.
- .Unterstützende Schiene bei Parese des Hinterlaufs, Hüft-, Knie- und Sprunggelenksarthritits; Dislokation des Hüftgelenks; Rehabilitation von Femurfrakturen und Hüftgelenksverletzungen.
- .Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung des Hinterlaufs in einem gewünschten Winkel.
- .Biegsame Kunststoffplatte am Oberlauf ermöglicht starke Fixierung an den Oberschenkel.
- .Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.
- .Ausgestattet mit Schienen für beide Beine, die je nach Bedarf optional eingesetzt werden können.
- .Bei Artikel T-19162 XS, für kleine Hunde und Katzen, Länge aufgrund der kleinen Maße nicht einstellbar.

Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang
<i>mittelgroße Hunde</i>				
T-19063	S	38-53cm	22-28cm	10-14cm
T-19065	M	53-68cm	28-36cm	14-19cm
T-19067	L	68-85cm	36-44cm	19-24cm

Art.Nr.	Größe	Bauchumfang	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang
<i>kleine Hunde, Katzen</i>				
T-19162	XS	28-32cm	9-13cm	6-8cm
T-19163	S	30-34cm	13-17cm	7-9cm
T-19165	M	32-36cm	16-20cm	8-10cm
T-19167	L	34-38cm	20-25cm	10-12cm

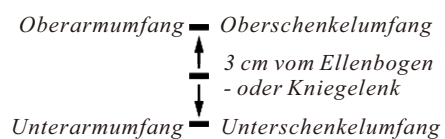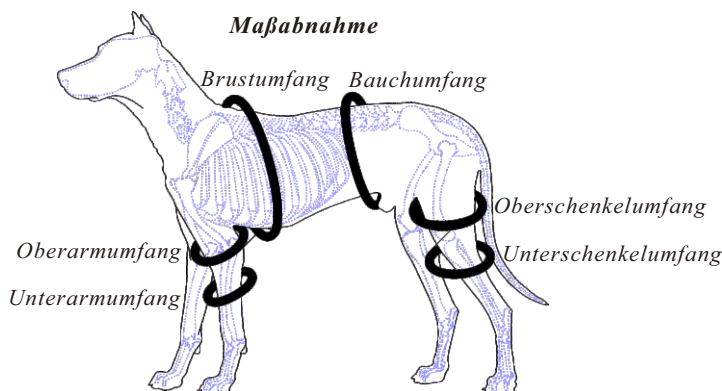





*mittelgroße Hunde*



*mittelgroße Hunde*



*kleine Hunde, Katzen*



**Einstellbare Ellbogenorthese**




.Fixierungsschiene bei Verletzungen des Ellbogengelenks, Humerus- und Radius- und Ulnafrakturen, Vorderlaufparese und Muskelzerrung, Unterstützung bei Ellbogenarthritis.  
.Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung des Ober- und Unterarms in einem gewünschten Winkel.  
.Hochwertiges, elastisches Abstands-gewirk ermöglicht eine komfortable Ellbogenbewegung.  
.Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.

<i>mittelgroße Hunde</i>					<i>kleine Hunde, Katzen</i>				
Art.Nr.		Größe	Oberarmumfang	Unterarmumfang	Art.Nr.		Größe	Oberarmumfang	Unterarmumfang
<i>links</i>	<i>rechts</i>				<i>links</i>	<i>rechts</i>			
T-20013	T-20023	S	20-24cm	12-14cm	T-20112	T-20122	XS	8-11cm	6-8cm
T-20015	T-20025	M	24-28cm	14-16cm	T-20113	T-20123	S	11-14cm	7-9cm
T-20017	T-20027	L	28-32cm	16-20cm	T-20115	T-20125	M	14-17cm	8-10cm
					T-20117	T-20127	L	17-20cm	10-12cm



*mittelgroße Hunde*

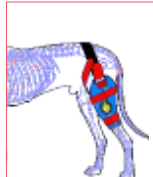

*kleine Hunde, Katzen*



**Einstellbare Knieorthese**



.Fixierungsschiene bei Verletzungen des Kniegelenks, Femur-, Tibia- und Fibulafrakturen, Hinterlaufparese und Muskelzerrung, Unterstützung bei Knierarthritis.  
.Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung des Ober- und Unterschenkels in einem gewünschten Winkel.  
.Hochwertiges, elastisches Abstands-gewirk ermöglicht eine komfortable Kniebewegung.  
.Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.

<i>mittelgroße Hunde</i>					<i>kleine Hunde, Katzen</i>				
Art.Nr.		Größe	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang	Art.Nr.		Größe	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang
<i>links</i>	<i>rechts</i>				<i>links</i>	<i>rechts</i>			
T-25013	T-25023	S	25-31cm	12-15cm	T-25112	T-25122	XS	9-13cm	6-8cm
T-25015	T-25025	M	31-37cm	15-19cm	T-25113	T-25123	S	13-17cm	7-9cm
T-25017	T-25027	L	37-44cm	19-24cm	T-25115	T-25125	M	16-20cm	8-10cm
					T-25117	T-25127	L	20-25cm	10-12cm



*mittelgroße Hunde*



*kleine Hunde, Katzen*

**Elastische Ellbogenbandage**



.Für den Einsatz an Ellbogen, Humerus, Radius und Ulna.  
.Zum Schutz vor Ellbogenverletzungen, verhindert Belastung der Vorderlaufmuskeln, -bänder und -sehnen.  
.Hochwertiges elastisches Material sorgt für eine komfortable Ellbogenbewegung, beide Seiten werden durch ein über den Rücken verlaufendes Band zusammen gehalten.  
.Fixierung und Unterstützung, Schmerzlinderung.  
.In zwei Materialien erhältlich, Abstands-gewirk für eine bessere Luftzirkulation, Neopren zum Warmhalten.

<i>mittelgroße Hunde</i>					<i>kleine Hunde, Katzen</i>				
Art.Nr.		Größe	Oberarmumfang	Unterarmumfang	Art.Nr.		Größe	Oberarmumfang	Unterarmumfang
<i>Neopren</i>	<i>Abstands-gewirk</i>				<i>Neopren</i>	<i>Abstands-gewirk</i>			
T-21053	T-21063	S	20-24cm	12-14cm	T-21152	T-21162	XS	8-11cm	6-8cm
T-21055	T-21065	M	24-28cm	14-16cm	T-21153	T-21163	S	11-14cm	7-9cm
T-21057	T-21067	L	28-32cm	16-20cm	T-21155	T-21165	M	14-17cm	8-10cm
					T-21157	T-21167	L	17-20cm	10-12cm



*mittelgroße Hunde*



*kleine Hunde, Katzen*

**Elastische Kniebandage**  

*.Für den Einsatz an Knie, Femur, Tibia und Fibula.  
.Zum Schutz vor Knieverletzungen, verhindert Belastung der Hinterlaufmuskeln, -bänder und -sehnen.  
.Hochwertiges elastisches Material sorgt für eine komfortable Kniebewegung, beide Seiten werden durch ein über die Hüfte verlaufendes Band zusammengehalten.  
.Fixierung und Unterstützung, Schmerzlinderung.  
.In zwei Materialien erhältlich, Abstandsgewirk für eine bessere Luftzirkulation, Neopren zum Warmhalten.*

Art.Nr.	Größe	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang
<i>mittelgroße Hunde</i>			
<i>Neopren</i>	<i>Abstandsgewirk</i>		
T-26053	T-26063	S	22-28cm
T-26055	T-26065	M	28-36cm
T-26057	T-26067	L	36-44cm

Art.Nr.	Größe	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
<i>Neopren</i>	<i>Abstandsgewirk</i>		
T-26152	T-26162	XS	9-13cm
T-26153	T-26163	S	13-17cm
T-26155	T-26165	M	16-20cm
T-26157	T-26167	L	20-25cm



**Elastische Ellbogenbandage**  

*.Zum Schutz vor Ellbogenverletzungen, verhindert Belastung der Ellbogenmuskeln, -bänder und -sehnen.  
.Zur Unterstützung der Rehabilitation nach Ellbogenoperationen.  
.Hochwertiges, elastisches Material ermöglicht eine komfortable Ellbogenbewegung.  
.Fixierung und Unterstützung, Schmerzlinderung.*

Art.Nr.	Größe	Oberarmumfang	Unterarmumfang
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-23013	S	20-24cm	12-14cm
T-23015	M	24-28cm	14-16cm
T-23017	L	28-32cm	16-20cm

Art.Nr.	Größe	Oberarmumfang	Unterarmumfang
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-23112	XS	8-11cm	6-8cm
T-23113	S	11-14cm	7-9cm
T-23115	M	14-17cm	8-10cm
T-23117	L	17-20cm	10-12cm



**Elastische Kniebandage**  

*.Zum Schutz vor Knieverletzungen, verhindert Belastung der Knienmuskeln, -bänder und -sehnen.  
.Zur Unterstützung der Rehabilitation nach Knieoperationen.  
.Hochwertiges, elastisches Material ermöglicht eine komfortable Kniebewegung.  
.Fixierung und Unterstützung, Schmerzlinderung.*

Art.Nr.	Größe	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-26703	S	22-28cm	10-14cm
T-26705	M	28-36cm	14-19cm
T-26707	L	36-44cm	19-24cm

Art.Nr.	Größe	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-26712	XS	9-13cm	6-8cm
T-26713	S	13-17cm	7-9cm
T-26715	M	16-20cm	8-10cm
T-26717	L	20-25cm	10-12cm



**Einstellbare Ellbogenschiene** 🐕 🐈

.Schiene zur Unterstützung und zum Schutz bei Verletzungen des Ellbogengelenks, Ellbogenarthritis, Vorderlaufparese, Muskelüberlastungen, nach Korrekturen von Dislokationen, während der Rehabilitationsphase.  
 .Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung in einem gewünschten Winkel oder zur Einschränkung der Bewegung während der Rehabilitationsphase.  
 .Halbschale mit elastischer Schaumstoffeinlage und Klettverschlüssen zur optimalen Fixierung.  
 .Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.

Art.Nr.	Größe	Oberarmumfang	Unterarmumfang
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-22013	S	20-24cm	12-14cm
T-22015	M	24-28cm	14-16cm
T-22017	L	28-32cm	16-20cm

Art.Nr.	Größe	Oberarmumfang	Unterarmumfang
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-22022	XS	8-11cm	6-8cm
T-22023	S	11-14cm	7-9cm
T-22025	M	14-17cm	8-10cm
T-22027	L	17-20cm	10-12cm





**Einstellbare Knieschiene** 🐕 🐈

.Schiene zur Unterstützung und zum Schutz bei Verletzungen des Kniegelenks, Kniearthritis, Hinterlaufparese, Muskelüberlastungen, nach Korrekturen von Dislokationen, während der Rehabilitationsphase.  
 .Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung in einem gewünschten Winkel oder zur Einschränkung der Bewegung während der Rehabilitationsphase.  
 .Halbschale mit elastischer Schaumstoffeinlage und Klettverschlüssen zur optimalen Fixierung.  
 .Zur Fixierung und Unterstützung des Tiers, zur Ganganpassung und -korrektur, zur Schmerzlinderung.



Art.Nr.	Größe	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-27013	S	22-28cm	10-14cm
T-27015	M	28-36cm	14-19cm
T-27017	L	36-44cm	19-24cm

Art.Nr.	Größe	Oberschenkelumfang	Unterschenkelumfang
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-27022	XS	9-13cm	6-8cm
T-27023	S	13-17cm	7-9cm
T-27025	M	16-20cm	8-10cm
T-27027	L	20-25cm	10-12cm

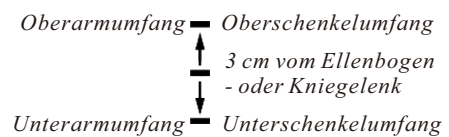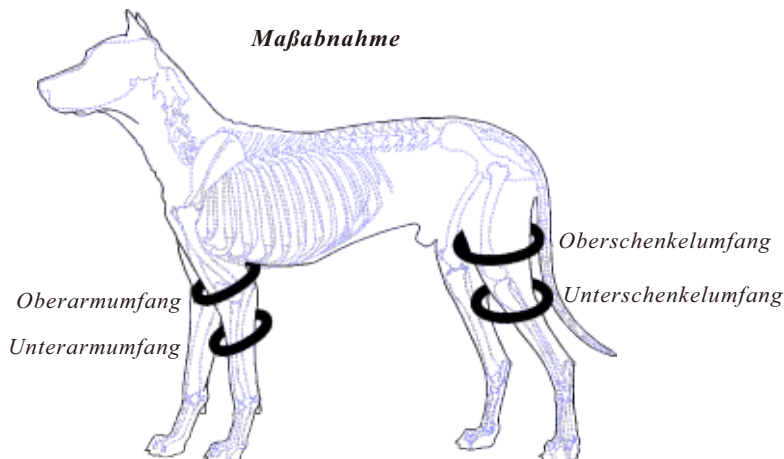**Maßabnahme**






**Fixierender Karpal-Walker**  

.Für den Einsatz an Radioulnargelenk, Carpus, Metacarpus und Phalangen.  
 .Fixierung und postoperative Rehabilitation von Metakarpal- und Phalanxfrakturen, bei Sehnen- und Bänderverletzungen und Karpalarthritis.  
 .Einteiliger halbrunder Walker, elastische Schaumstoffeinlage und Klettverschluss für einen sicheren Halt und hohen Tragekomfort.  
 .Walker reicht über Karpalgelenk hinaus, mit Antirutsch-Sohle für besseren Halt.  
 .Zur Fixierung, Unterstützung, Korrektur und zum Schutz von Pfote und Handgelenk.



Art.Nr.	Größe	Länge A	Umfang Carpus
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-30102	XS	10.5-12.5cm	9-10cm
T-30103	S	12.5-14.5cm	10-11.5cm
T-30105	M	14.5-16.5cm	11.5-12.5cm
T-30107	L	16.5-18.5cm	12.5-14cm
T-30108	XL	18.5-20.5cm	14-15.5cm

Art.Nr.	Größe	Länge A	Umfang Carpus
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-30112	XS	7-9cm	6-8cm
T-30113	S	8-10cm	7-9cm
T-30115	M	9-11cm	8-10cm
T-30117	L	10-12cm	9-11cm

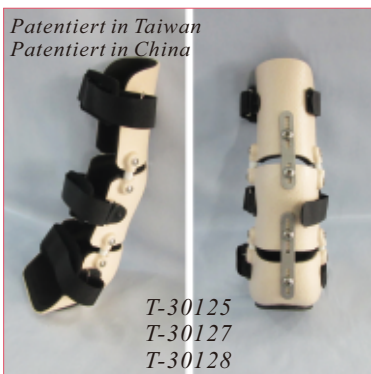Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China



Art.Nr.	Größe	Länge A	Umfang Carpus
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-30122	XS	10.5-12.5cm	9-10cm
T-30123	S	12.5-14.5cm	10-11.5cm
T-30125	M	14.5-16.5cm	11.5-12.5cm
T-30127	L	16.5-18.5cm	12.5-14cm
T-30128	XL	18.5-20.5cm	14-15.5cm

**Einstellbarer Karpal-Walker**  

.Schiene zur Fixierung und Unterstützung nach Operationen bei Metakarpalfrakturen, Gelenksverletzungen und Arthritis.  
 .Durch einstellbare Scharniere an Seite und Rückseite lassen sich Flexion und Extension des Karpalgelenks kontrollieren . Zur Korrektur bei karpaler Hyperextension sowie Varus- oder Valgusstellungen.  
 .Bietet durch die hohe Ausführung, Klettverschlüsse und Schaumstoffeinlage komfortablen und sicheren Halt.  
 .Die Antirutsch-Sohle sorgt für einen natürlichen Gang.  
 .Zur Fixierung, Unterstützung, Korrektur und zum Schutz von Pfote und Handgelenk.  
 .T-30125 M, T-30127 L und T-30128 XL, für mittelgroße Hunde sind dreiteilig ausgeführt.  
 T-30122 XS und T-30123 S, für mittelgroße Hunde und alle Größen für kleine Hunde oder Katzen, sind zweiteilig ausgeführt.

Art.Nr.	Größe	Länge A	Umfang Carpus
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-30132	XS	7-9cm	6-8cm
T-30133	S	8-10cm	7-9cm
T-30135	M	9-11cm	8-10cm
T-30137	L	10-12cm	9-11cm



### Einstellbarer Karpal-Walker



.Schiene zur Fixierung und Unterstützung nach Operationen bei Metakarpalfrakturen, Gelenksverletzungen und Arthritis.  
 .Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung in einem gewünschten Winkel oder zur Bewegungseinschränkung während der Rehabilitationsphase. Zur Korrektur bei karpaler Hyperextension sowie Varus- oder Valgusstellungen.  
 .Bietet durch die hohe Ausführung, Klettverschlüsse und Schaumstoffeinlage komfortablen und sicheren Halt.  
 .Die Antirutsch-Sohle sorgt für einen natürlichen Gang.  
 .Zur Fixierung, Unterstützung, Korrektur und zum Schutz von Pfote und Handgelenk.  
 .T-30152 XS und T-30153 S, für kleine Hunde und Katzen, sind zweiteilig ausgeführt.

Art.Nr.	Größe	Länge A	Umfang Carpus
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-30142	XS	10.5-12.5cm	9-10cm
T-30143	S	12.5-14.5cm	10-11.5cm
T-30145	M	14.5-16.5cm	11.5-12.5cm
T-30147	L	16.5-18.5cm	12.5-14cm
T-30148	XL	18.5-20.5cm	14-15.5cm

Art.Nr.	Größe	Länge A	Umfang Carpus
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-30152	XS	7-9cm	6-8cm
T-30153	S	8-10cm	7-9cm
T-30155	M	9-11cm	8-10cm
T-30157	L	10-12cm	9-11cm




### Fixierender Tarsal-Walker





.Für den Einsatz an Tibia, Fibula, Tarsus, Metatarsus und Phalangen.  
 .Fixierung und postoperative Rehabilitation von Metatarsal- und Phalanxfrakturen, bei Sehnen- und Bänderverletzungen und Fußwurzelarthritis.  
 .Einteiliger halbrunder Walker, elastische Schaumstoffeinlage und Klettverschluss für einen sicheren Halt und hohen Tragekomfort.  
 .Walker reicht über Tarsalgelenk hinaus, mit Antirutsch-Sohle für besseren Halt.  
 .Zur Fixierung, Unterstützung, Korrektur und zum Schutz der Pfote und des Knöchels.

Art.Nr.	Größe	Länge B	Umfang Tarsus
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-30202	XS	12.5-16cm	10-12cm
T-30203	S	14.5-18cm	12-14cm
T-30205	M	17.5-21cm	14-16cm
T-30207	L	20.5-24.5cm	16-18cm
T-30208	XL	24.5-28.5cm	18-20cm

Art.Nr.	Größe	Länge B	Umfang Tarsus
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-30212	XS	8-11cm	6-8cm
T-30213	S	9-12cm	7-9cm
T-30215	M	10-13cm	8-10cm
T-30217	L	12-15cm	9-11cm

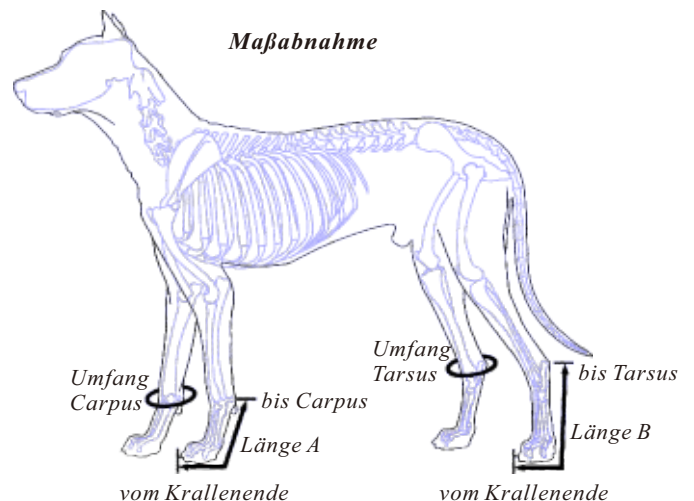

Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China

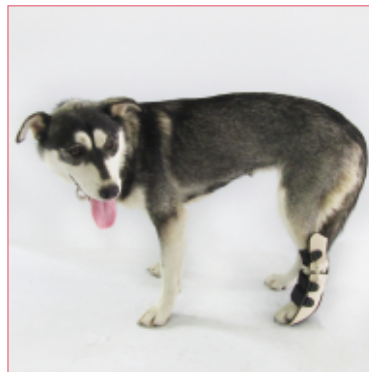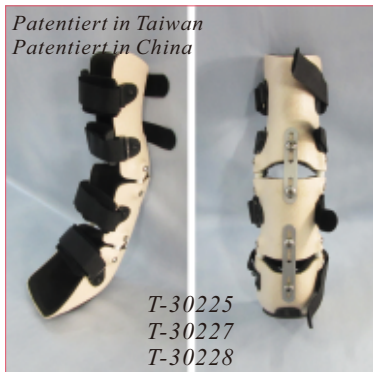

T-30225  
T-30227  
T-30228

Art.Nr.	Größe	Länge B	Umfang Tarsus
mittelgroße Hunde			
T-30222	XS	12.5-16cm	10-12cm
T-30223	S	14.5-18cm	12-14cm
T-30225	M	17.5-21cm	14-16cm
T-30227	L	20.5-24.5cm	16-18cm
T-30228	XL	24.5-28.5cm	18-20cm

Art.Nr.	Größe	Länge B	Umfang Tarsus
kleine Hunde, Katzen			
T-30232	XS	8-11cm	6-8cm
T-30233	S	9-12cm	7-9cm
T-30235	M	10-13cm	8-10cm
T-30237	L	12-15cm	9-11cm

### Einstellbarer Tarsal-Walker 🐕 🐱

.Schiene zur Fixierung und Unterstützung nach Operationen bei Metatarsalfrakturen, Gelenksverletzungen und Arthritis.  
.Durch einstell- und entfernbare Scharniere an Seite und Rückseite lassen sich Flexion und Extension des Tarsalgelenks kontrollieren. Zur Korrektur bei tarsaler Hyperextension sowie Varus- oder Valgusstellungen.  
.Bietet durch die hohe Ausführung, Klettverschlüsse und Schaumstoffeinlage komfortablen und sicheren Halt.  
.Die Antirutsch-Sohle sorgt für einen natürlichen Gang.  
.Zur Fixierung, Unterstützung, Korrektur und zum Schutz der Pfote und des Knöchels.

*T-30225 M, T-30227 L und T-30228 XL, für mittelgroße Hunde sind dreiteilig ausgeführt.  
T-30222 XS und T-30223 S, für mittelgroße Hunde und alle Größen für kleine Hunde oder Katzen, sind zweiteilig ausgeführt.*



T-30252  
T-30253

### Einstellbarer Tarsal-Walker 🐕 🐱

.Schiene zur Fixierung und Unterstützung nach Operationen bei Metatarsalfrakturen, Gelenksverletzungen und Arthritis.  
.Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung in einem gewünschten Winkel oder zur Bewegungseinschränkung während der Rehabilitationsphase. Zur Korrektur bei tarsaler Hyperextension sowie Varus- oder Valgusstellungen.  
.Bietet durch die hohe Ausführung, Klettverschlüsse und Schaumstoffeinlage komfortablen und sicheren Halt.  
.Die Antirutsch-Sohle sorgt für einen natürlichen Gang.  
.Zur Fixierung, Unterstützung, Korrektur und zum Schutz der Pfote und des Knöchels.

*T-30252 XS und T-30253 S, für kleine Hunde und Katzen, sind zweiteilig ausgeführt.*

Art.Nr.	Größe	Länge B	Umfang Tarsus
mittelgroße Hunde			
T-30242	XS	12.5-16cm	10-12cm
T-30243	S	14.5-18cm	12-14cm
T-30245	M	17.5-21cm	14-16cm
T-30247	L	20.5-24.5cm	16-18cm
T-30248	XL	24.5-28.5cm	18-20cm

Art.Nr.	Größe	Länge B	Umfang Tarsus
kleine Hunde, Katzen			
T-30252	XS	8-11cm	6-8cm
T-30253	S	9-12cm	7-9cm
T-30255	M	10-13cm	8-10cm
T-30257	L	12-15cm	9-11cm



### Fixierende Karpalgelenksschiene

- Zum Einsatz an Radioulnargelenk, Karpus und Metakarpus.
- Zur Fixierung bei Metakarpalfrakturen und karpaler Dislokation, Korrektur, Unterstützung und Schutz des Vorderlaufs.
- Postoperative Rehabilitationshilfe bei Sehnen- und Bänderverletzungen, karpaler Arthritis.
- Einteilige, halbrunde Orthese, elastische Schaumstoffeinlage und Klettverschluss für einen sicheren Halt und hohen Tragekomfort.

Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Schielenlänge
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-30302	XS	9-10cm	15cm
T-30303	S	10-11.5cm	18.5cm
T-30305	M	11.5-12.5cm	20cm
T-30307	L	12.5-14cm	21.5cm
T-30308	XL	14-15.5cm	22cm

Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Schielenlänge
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-30312	XS	6-8cm	8cm
T-30313	S	7-9cm	9cm
T-30315	M	8-10cm	10cm
T-30317	L	9-11cm	11cm




### Einstellbare Karpalgelenksschiene

- Schiene zur Fixierung und Unterstützung nach Operationen bei Metakarpalfrakturen, Gelenkdislokation, Arthritis sowie Sehnen- und Bänderrissen.
- Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung in einem gewünschten Winkel oder zur Bewegungseinschränkung während der Rehabilitationsphase.
- Zur Fixierung bei Metakarpalfrakturen und karpaler Dislokation, Korrektur, Unterstützung und Schutz des Vorderlaufs.
- Halbschale mit elastischer Schaumstoffeinlage und Klettverschlüssen zur optimalen Fixierung.

Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Schielenlänge
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-30322	XS	9-10cm	15cm
T-30323	S	10-11.5cm	18.5cm
T-30325	M	11.5-12.5cm	20cm
T-30327	L	12.5-14cm	21.5cm
T-30328	XL	14-15.5cm	22cm

Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Schielenlänge
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-30332	XS	6-8cm	8cm
T-30333	S	7-9cm	9cm
T-30335	M	8-10cm	10cm
T-30337	L	9-11cm	11cm

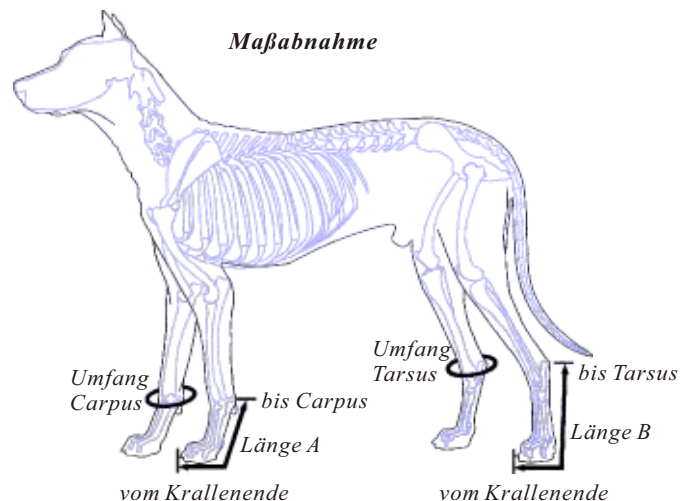



### Fixierende Tarsalgelenksschiene

.Zum Einsatz an Tibia, Fibula, Tarsus und Metatarsus.  
 .Zur Fixierung bei Metatarsalfrakturen und tarsaler Dislokation, Korrektur, Unterstützung und Schutz des Hinterlaufs.  
 .Postoperative Rehabilitationshilfe bei Sehnen- und Bänderverletzungen, tarsaler Arthritis.  
 .Einteilige, halbrunde Orthese, elastische Schaumstoffeinlage und Klettverschluss für einen sicheren Halt und hohen Tragekomfort.

Art.Nr.	Größe	Umfang Tarsus	Schielenlänge
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-30402	XS	10-12cm	16cm
T-30403	S	12-14cm	18cm
T-30405	M	14-16cm	21cm
T-30407	L	16-18cm	24cm
T-30408	XL	18-20cm	25cm

Art.Nr.	Größe	Umfang Tarsus	Schielenlänge
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-30412	XS	6-8cm	8cm
T-30413	S	7-9cm	10cm
T-30415	M	8-10cm	12cm
T-30417	L	9-11cm	14cm



### Einstellbare Tarsalgelenksschiene

.Schiene zur Fixierung und Unterstützung nach Operationen bei Metatarsalfrakturen, Gelenkdislokation, Arthritis sowie Sehnen- und Bänderrissen.  
 .Einstellbares Gelenk zur Fixierung und Unterstützung in einem gewünschten Winkel oder zur Bewegungseinschränkung während der Rehabilitationsphase.  
 .Zur Fixierung bei Metatarsalfrakturen und tarsaler Dislokation, Korrektur, Unterstützung und Schutz des Hinterlaufs.  
 .Halbschale mit elastischer Schaumstoffeinlage und Klettverschlüssen zur optimalen Fixierung.

Art.Nr.	Größe	Umfang Tarsus	Schielenlänge
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-30422	XS	10-12cm	16cm
T-30423	S	12-14cm	18cm
T-30425	M	14-16cm	21cm
T-30427	L	16-18cm	24cm
T-30428	XL	18-20cm	25cm

Art.Nr.	Größe	Umfang Tarsus	Schielenlänge
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-30432	XS	6-8cm	8cm
T-30433	S	7-9cm	10cm
T-30435	M	8-10cm	12cm
T-30437	L	9-11cm	14cm



### Fixierender Phalangen-Walker

.Zum Einsatz an Metakarpus und Phalangen des Vorderlaufs bzw. Metatarsus und Phalangen des Hinterlaufs, niedriger als Karpal-/Tarsal-Walker.  
 .Fixierung und postoperative Rehabilitation nach Frakturen des Metakarpus, Metatarsus und der Phalangen, Bänder- und Sehnenverletzungen, Korrektur, Unterstützung und Schutz der Pfoten.  
 .Einteilige, halbrunde Orthese, Schaumstoffeinlage und Klettverschluss für einen sicheren Halt und hohen Tragekomfort.

Art.Nr.	Größe	Länge A/B	Umfang Carpus / Tarsus
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-30502	XS	10.5-17.5cm	9-12cm
T-30503	S	12.5-19.5cm	10-14cm
T-30505	M	14.5-21.5cm	11.5-16cm
T-30507	L	16.5-25cm	12.5-18cm
T-30508	XL	18.5-28.5cm	14-20cm

Art.Nr.	Größe	Länge A/B	Umfang Carpus / Tarsus
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-30512	XS	7-11cm	6-8cm
T-30513	S	8-12cm	7-9cm
T-30515	M	9-13cm	8-10cm
T-30517	L	10-15cm	9-11cm





**Anbiegbare Karpalorthese**



.Zum Einsatz an Radius, Ulna, Karpal- und Metakarpalgelenk.  
.Fixierung und postoperative Rehabilitation bei karpalen Dislokationen, Radius- und Ulnafrakturen, Bänder- und Sehnenverletzungen und Karpalarthritis, Korrektur, Unterstützung und Schutz des Vorderlaufs.  
.Anbiegbare Aluminiumschiene zur Anpassung an den karpalen Winkel, Klettverschluss für sicheren und angenehmen Tragekomfort.  
**.Achtung: Beim Anbiegen der Aluminiumschiene ist darauf zu achten, dass diese stufenweise in Form gebracht wird.**

Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Länge der Orthese	Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Länge der Orthese	Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Länge der Orthese
<i>mittelgroße Hunde</i>				<i>kleine Hunde, Katzen</i>				<i>große Hunde</i>			
T-31102	XS	9-11cm	7cm	T-31112	XS	6-8cm	6cm	T-31123	S	17-19cm	16.5cm
T-31103	S	11-13cm	9cm	T-31113	S	7-9cm	6cm	T-31125	M	18-20cm	18cm
T-31105	M	13-15cm	11cm	T-31115	M	8-10cm	7cm	T-31127	L	19-21cm	20.5cm
T-31107	L	15-17cm	13cm	T-31117	L	9-11cm	8cm				
T-31108	XL	17-19cm	15cm								




**Elastische Karpalorthese**



.Zum Schutz vor Karpalverletzungen, Vorbeugen von Überlastung der Muskulatur, Bänder und Sehnen.  
.Rehabilitationshilfe nach Karpalgelenkseingriffen.  
.Hochwertiges elastisches Material sorgt für angenehmen Tragekomfort.  
.Fixierung und Schutz des Vorderlaufs, Schmerzlinderung.

Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Länge der Orthese	Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Länge der Orthese
<i>mittelgroße Hunde</i>				<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-32803	S	11-13cm	13cm	T-32812	XS	6-8cm	6.5cm
T-32805	M	13-15cm	14.5cm	T-32813	S	7-9cm	6.5cm
T-32807	L	15-17cm	16.5cm	T-32815	M	8-10cm	7.5cm
T-32808	XL	17-19cm	18cm	T-32817	L	9-11cm	8.5cm

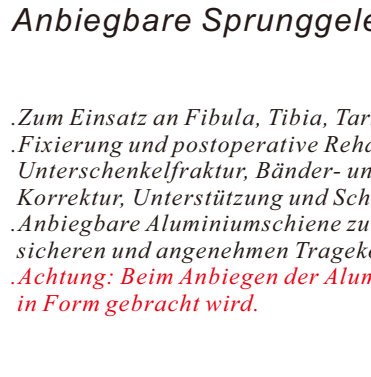

**Anbiegbare Sprunggelenksorthese**



.Zum Einsatz an Fibula, Tibia, Tarsal- und Metatarsalgelenk.  
.Fixierung und postoperative Rehabilitation bei Sprunggelenksdislokation, Unterschenkelfraktur, Bänder- und Sehnenverletzungen und Sprunggelenksarthritis, Korrektur, Unterstützung und Schutz des Hinterlaufs.  
.Anbiegbare Aluminiumschiene zur Anpassung an den tarsalen Winkel, Klettverschluss für sicheren und angenehmen Tragekomfort.  
**.Achtung: Beim Anbiegen der Aluminiumschiene ist darauf zu achten, dass diese stufenweise in Form gebracht wird.**

Art.Nr.	Größe	Umfang Tarsus	Länge der Orthese	Art.Nr.	Größe	Umfang Tarsus	Länge der Orthese	Art.Nr.	Größe	Umfang Tarsus	Länge der Orthese
<i>mittelgroße Hunde</i>				<i>kleine Hunde, Katzen</i>				<i>große Hunde</i>			
T-31202	XS	10-12cm	15cm	T-31212	XS	6-8cm	9cm	T-31223	S	18-21cm	24.5cm
T-31203	S	12-14cm	18cm	T-31213	S	7-9cm	11cm	T-31225	M	20-23cm	27.5cm
T-31205	M	14-16cm	21cm	T-31215	M	8-10cm	13cm	T-31227	L	22-25cm	27.5cm
T-31207	L	16-18cm	23cm	T-31217	L	9-11cm	15cm				
T-31208	XL	18-20cm	25cm								



**Elastische Tarsalgelenksorthese**  

.Zum Schutz vor Sprunggelenksverletzungen, Vorbeugen von Überlastung der Muskulatur, Bänder und Sehnen.  
.Rehabilitationshilfe nach Tarsalgelenkseingriffen.  
.Hochwertiges elastisches Material sorgt für angenehmen Tragekomfort.  
.Fixierung und Schutz des Vorderlaufs, Schmerzlinderung.

Art.Nr.	Größe	Umfang Tarsus	Länge der Orthese	Art.Nr.	Größe	Umfang Tarsus	Länge der Orthese
<i>mittelgroße Hunde</i>				<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-32903	S	11-13cm	13cm	T-32912	XS	6-8cm	6.5cm
T-32905	M	13-15cm	14.5cm	T-32913	S	7-9cm	6.5cm
T-32907	L	15-17cm	16.5cm	T-32915	M	8-10cm	7.5cm
T-32908	XL	17-19cm	18cm	T-32917	L	9-11cm	8.5cm



**Anbiegbare Phalangenorthese**  

.Für Karpal-, Metakarpalgelenk und Phalangen des Vorderlaufs bzw. Tarsal-, Metatarsalgelenk und Phalangen des Hinterlaufs.  
.Fixierung und postoperative Rehabilitation bei Metakarpal-, Metatarsal- und Phalanxfrakturen, Arthritis des Karpal- bzw. Tarsalgelenks, bei Sehnen- und Bänderverletzungen.  
.Fixierung, Unterstützung, Korrektur und Schutz von Pfote, Handgelenk und Knöchel.  
.Anbiegbare Aluminiumschiene zur Anpassung an den karpalen und tarsalen Winkel, Klettverschluss für sicheren Halt und angenehmen Tragekomfort.  
.Achtung: Beim Anbiegen der Aluminiumschiene ist darauf zu achten, dass diese stufenweise in Form gebracht wird.

Art.Nr.	Größe	Länge A/B	Umfang Carpus/Tarsus	Art.Nr.	Größe	Länge A/B	Umfang Carpus/Tarsus	Art.Nr.	Größe	Länge A/B	Umfang Carpus/Tarsus
<i>mittelgroße Hunde</i>				<i>kleine Hunde, Katzen</i>				<i>große Hunde</i>			
T-31302	XS	10.5-17.5cm	9-12cm	T-31312	XS	7-10cm	6-9cm	T-31323	S	16.5-25cm	14-20cm
T-31303	S	12.5-19.5cm	10-14cm	T-31313	S	8-12cm	7-10cm	T-31325	M	18.5-28.5cm	17-22cm
T-31305	M	14.5-21.5cm	11.5-16cm	T-31315	M	10-14cm	8-11cm	T-31327	L	20.5-30.5cm	20-25cm
T-31307	L	16.5-25cm	12.5-18cm	T-31317	L	12-17.5cm	9-12cm				
T-31308	XL	18.5-28.5cm	14-20cm								



**Elastische Pfotenschlinge**  

.Zur Unterstützung bei schwachem Lauf oder Deformationen aufgrund von Nerven- oder Bänderverletzungen.  
.Die Schlinge ist einstellbar, sodass sie an jedes Stadium des Heilungsprozesses angepasst werden kann.  
.Leicht und bequem durch elastisches Material, das eine bequeme Flexion und Extension ermöglicht.  
.Durch die einstellbare Schlinge wird der Druck auf die verletzte oder schwache Pfote vermindert, die Länge ist mühelos einstellbar.

Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus/Tarsus	Länge	Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus/Tarsus	Länge
<i>mittelgroße Hunde</i>				<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-32103	S	10-12cm	15cm	T-32112	XS	6-8cm	9cm
T-32105	M	12-14cm	18cm	T-32113	S	7-9cm	11cm
T-32107	L	14-16cm	21cm	T-32115	M	8-10cm	13cm
T-32108	XL	16-18cm	23cm	T-32117	L	9-11cm	15cm



*mittelgroße Hunde*



*kleine Hunde, Katzen*



**Anbiegbare Pfortenschlinge** 🐶 🐱

.Für den Hinterlauf.  
.Zur Unterstützung bei schwachem Lauf oder Deformationen aufgrund von Nerven- oder Bänderverletzungen.  
.Die Schlinge ist einstellbar, sodass sie an jedes Stadium des Heilungsprozesses angepasst werden kann.  
.Eine biegsame Kunststoffplatte bezogen mit atmungsaktivem Material sorgt für eine bequeme Anpassung an den Mittelfuß.  
.Durch die einstellbare Schlinge wird der Druck auf die verletzte oder schwache Pforte vermindert, die Länge ist mühelos einstellbar.

Art.Nr.	Größe	Unterschenkelumfang	Länge
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-32203	S	13-16cm	9cm
T-32205	M	16-19cm	9cm
T-32207	L	19-22cm	12cm
T-32208	XL	22-25cm	12cm

Art.Nr.	Größe	Unterschenkelumfang	Länge
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-32212	XS	5-7cm	5cm
T-32213	S	7-9cm	5cm
T-32215	M	9-11cm	8cm
T-32217	L	11-13cm	8cm



**Elastischer Pfortenschutz** 🐶 🐱

.Zur Unterstützung bei schwachem Lauf oder Deformationen aufgrund von Nerven- oder Bänderverletzungen.  
.Die Schlinge ist einstellbar, sodass sie an jedes Stadium des Heilungsprozesses angepasst werden kann.  
.Leicht und bequem durch elastisches Material, das eine bequeme Flexion und Extension ermöglicht.  
.Die Verschlussbänder sorgen für eine Entlastung der verletzten oder schwachen Pforte.

Art.Nr.	Größe	Länge A/B	Umfang Carpus/Tarsus
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-32303	S	10.5-17.5cm	9-12cm
T-32305	M	12.5-19.5cm	10-14cm
T-32307	L	14.5-21.5cm	11.5-16cm
T-32308	XL	16.5-25cm	12.5-18cm

Art.Nr.	Größe	Länge A/B	Umfang Carpus/Tarsus
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-32312	XS	7-10cm	6-9cm
T-32313	S	8-12cm	7-10cm
T-32315	M	10-14cm	8-11cm
T-32317	L	12-17.5cm	9-12cm



**Dorsi-Flex Assist Vorderlauf** 🐶 🐱

.Zum Einsatz bei propriozeptiven neurologischen Störungen, Sehnenverletzungen oder Läsion der Pfortenextensoren.  
.Unterstützt das Tier beim Gehen bei instabilen oder schwachen Vorderläufen.  
.Hilft bei der Flexion-Extension-Bewegung bei gleichzeitiger Unterstützung des Vorderlaufs, vermindert Ausrutschen und Laufen auf dem Pfortenrücken.  
.Entlastet das Ellbogengelenk im Stand und in Bewegung.

Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Pfortenlänge x -breite
<i>mittelgroße Hunde</i>			
T-32403	S	10-12cm	60 x 77 mm
T-32405	M	12-14cm	65 x 84 mm
T-32407	L	14-16cm	70 x 90 mm
T-32408	XL	16-18cm	75 x 97 mm

Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Pfortenlänge x -breite
<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-32412	XS	6-8cm	45 x 50 mm
T-32413	S	7-9cm	45 x 56 mm
T-32415	M	8-10cm	50 x 63 mm
T-32417	L	9-11cm	55 x 70 mm



**Dorsi-Flex Assist Hinterlauf** 🐕 🐈

.Zum Einsatz bei propriozeptiven neurologischen Störungen, Sehnenverletzungen oder Läsion der Pfortenextensoren.  
.Unterstützt das Tier beim Gehen bei instabilen oder schwachen Hinterläufen.  
.Hilft bei der Flexion-Extension-Bewegung bei gleichzeitiger Unterstützung des Vorderlaufs, vermindert Ausrutschen und Laufen auf dem Pfortenrücken.  
.Entlastet das Kniegelenk im Stand und in Bewegung.

Art.Nr.	Größe	Umfang Tarsus	Pfortenlänge x -breite	Art.Nr.	Größe	Umfang Tarsus	Pfortenlänge x -breite
<i>mittelgroße Hunde</i>				<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-32503	S	10-12cm	60 x 77 mm	T-32512	XS	6-8cm	45 x 50 mm
T-32505	M	12-14.5cm	65 x 84 mm	T-32513	S	7-9cm	45 x 56 mm
T-32507	L	14.5-17cm	70 x 90 mm	T-32515	M	8-10cm	50 x 63 mm
T-32508	XL	17-20cm	75 x 97 mm	T-32517	L	9-11cm	55 x 70 mm




Patentiert in Taiwan

**Vorderlauforthese mit Rollen** 🐕

.Verhindert bei Hunden mit karpalen Läsionen das Laufen auf dem Pfortenrücken, schützt den Vorderlauf vor Abrasion.  
.Unterstützt den Hund bei m Gehen bei instabilem oder schwachem Vorderlauf bzw. Vorderpfote.  
.Fixiert und begradigt den Vorderlauf je nach Bedarf.

Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Länge A	Art.Nr.	Größe	Umfang Carpus	Länge A
<i>mittelgroße Hunde</i>				<i>kleine Hunde</i>			
T-32703	S	10-12cm	10.5-12.5cm	T-32712	XS	6-8cm	6-8cm
T-32705	M	12-14cm	12.5-14.5cm	T-32713	S	7-9cm	7-9cm
T-32707	L	14-16cm	14.5-17.5cm	T-32715	M	8-10cm	8-10cm
T-32708	XL	16-18cm	17.5-20.5cm	T-32717	L	9-11cm	9-11cm

**Maßabnahme**

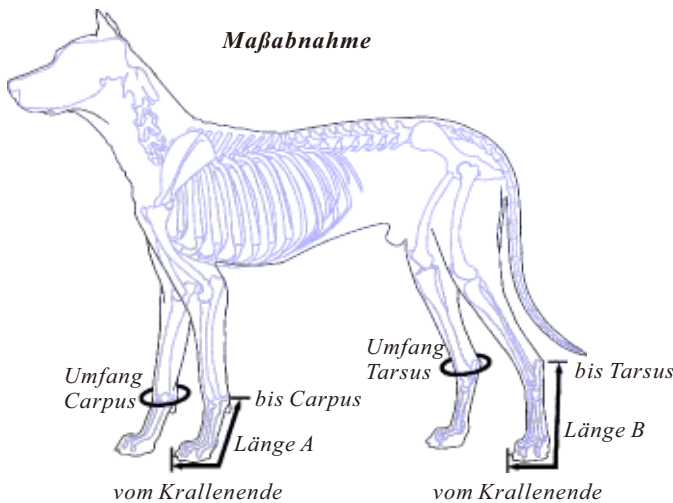




### Vorderlaufprothese

.Bei Vorderlaufamputationen unterhalb des Karpalgelenks.  
.Die Halbschale ist robust genug, um das Bein stützen und schützen zu können.  
.Durch das einstellbare Gelenk im Karpalbereich ist das Karpalgelenk frei beweglich, sodass Begleiterkrankungen vermieden und die funktionelle Heilung des Gelenks begünstigt werden.

- .Hinweis: 1.** Vor dem Anlegen der Prothese den amputierten Lauf mit Baumwollverband versorgen (nicht im Lieferumfang enthalten), um ihn sicher zu fixieren und Blutergüsse zu vermeiden.  
**2.** Das Laufen sollte auf ebenem Boden und mit Unterstützung geübt werden. Bei zu schnellem Laufen oder unebenem Gelände kann sich die Prothese möglicherweise lösen.

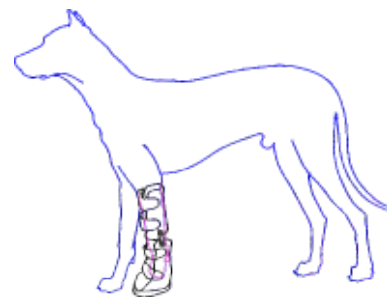


Art.Nr.	Größe	Länge A	Umfang Carpus	Art.Nr.	Größe	Länge A	Umfang Carpus
<i>mittelgroße Hunde</i>				<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-33102	XS	10.5-12.5cm	9-10cm	T-33112	XS	7-9cm	6-8cm
T-33103	S	12.5-14.5cm	10-11.5cm	T-33113	S	8-10cm	7-9cm
T-33105	M	14.5-16.5cm	11.5-12.5cm	T-33115	M	9-11cm	8-10cm
T-33107	L	16.5-18.5cm	12.5-14cm	T-33117	L	10-12cm	9-11cm
T-33108	XL	18.5-20.5cm	14-15.5cm				




### Hinterlaufprothese

.Bei Hinterlaufamputationen unterhalb des Tarsalgelenks.  
.Die Halbschale ist robust genug, um das Bein stützen und schützen zu können.  
.Durch das einstellbare Gelenk im Tarsalbereich ist das Tarsalgelenk frei beweglich, sodass Begleiterkrankungen vermieden und die funktionelle Heilung des Gelenks begünstigt werden.

- .Hinweis 1.** Vor dem Anlegen der Prothese den amputierten Lauf mit Baumwollverband versorgen (nicht im Lieferumfang enthalten), um ihn sicher zu fixieren und Blutergüsse zu vermeiden.  
**2.** Das Laufen sollte auf ebenem Boden und mit Unterstützung geübt werden. Bei zu schnellem Laufen oder unebenem Gelände kann sich die Prothese möglicherweise lösen.

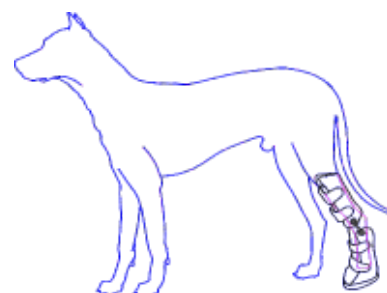

Art.Nr.	Größe	Länge B	Umfang Tarsus	Art.Nr.	Größe	Länge B	Umfang Tarsus
<i>mittelgroße Hunde</i>				<i>kleine Hunde, Katzen</i>			
T-33602	XS	12.5-16cm	10-12cm	T-33612	XS	8-11cm	6-8cm
T-33603	S	14.5-18cm	12-14cm	T-33613	S	9-12cm	7-9cm
T-33605	M	17.5-21cm	14-16cm	T-33615	M	10-13cm	8-10cm
T-33607	L	20.5-24.5cm	16-18cm	T-33617	L	12-15cm	9-11cm
T-33608	XL	24.5-28.5cm	18-20cm				

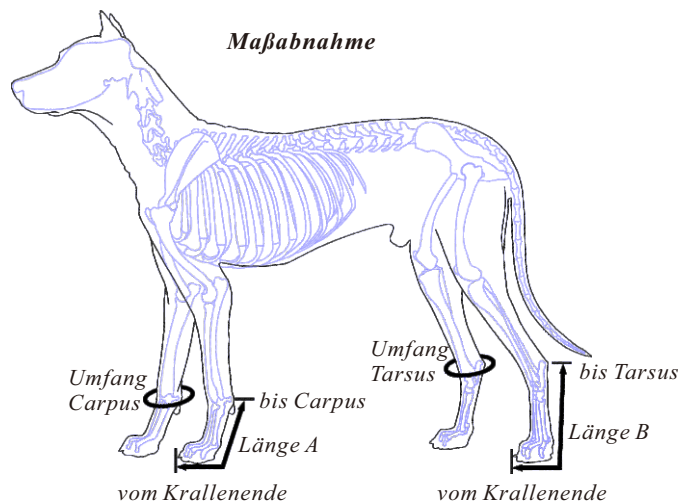




**Unterstützende Vorderlaufprothese**



.Bei Vorderlaufamputationen.  
.Die robusten Außenschalen, bestehend aus zwei Halbschalen, die einander abdecken, schützen und stützen den amputierten Lauf.  
.Die einstellbare Aluminiumschiene ist leicht und dennoch sehr stabil.  
.Die Gummisohle ist stoßdämpfend und abriebfest.

- Hinweis:** 1. Das verbleibende radioulnare Körperteil sollte mindestens zu 2/3 erhalten sein. Sollte dies nicht der Fall sein, ist anstelle der Prothese ein Rollstuhl zu empfehlen.  
2. Vor dem Anlegen der Prothese den amputierten Lauf mit Baumwollverband versorgen (nicht im Lieferumfang enthalten), um ihn sicher zu fixieren und Blutergüsse zu vermeiden.  
3. Das Laufen sollte auf ebenem Boden und mit Unterstützung geübt werden. Bei zu schnellem Laufen oder unebenem Gelände kann sich die Prothese möglicherweise lösen.

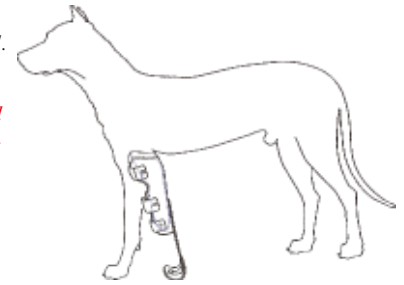

Art.Nr.	Größe	Unterarmumfang	Art.Nr.	Größe	Unterarmumfang
mittelgroße Hunde			kleine Hunde, Katzen		
T-33203	S	12-14cm	T-33213	S	6-8cm
T-33205	M	14-16cm	T-33215	M	7-9cm
T-33207	L	16-20cm	T-33217	L	8-10cm
			T-33218	XL	10-12cm




**Unterstützende Hinterlaufprothese**





.Bei Hinterlaufamputationen.  
.Die robusten Außenschalen, bestehend aus zwei Halbschalen, die einander abdecken, schützen und stützen den amputierten Lauf.  
.Die einstellbare Aluminiumschiene ist leicht und dennoch sehr stabil.  
.Die Gummisohle ist stoßdämpfend und abriebfest.

- Hinweis:** 1. Das verbleibende tibiofibuläre Körperteil sollte mindestens zu 2/3 erhalten sein. Sollte dies nicht der Fall sein, ist anstelle der Prothese ein Rollstuhl zu empfehlen.  
2. Vor dem Anlegen der Prothese den amputierten Lauf mit Baumwollverband versorgen (nicht im Lieferumfang enthalten), um ihn sicher zu fixieren und Blutergüsse zu vermeiden.  
3. Das Laufen sollte auf ebenem Boden und mit Unterstützung geübt werden. Bei zu schnellem Laufen oder unebenem Gelände kann sich die Prothese möglicherweise lösen.

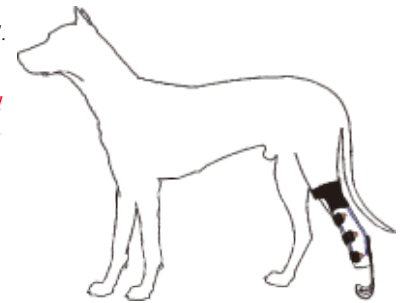

Art.Nr.	Größe	Unterschenkelumfang	Art.Nr.	Größe	Unterschenkelumfang
mittelgroße Hunde			kleine Hunde, Katzen		
T-33703	S	10-14cm	T-33713	S	6-8cm
T-33705	M	14-19cm	T-33715	M	7-9cm
T-33707	L	19-24cm	T-33717	L	8-10cm
			T-33718	XL	10-12cm

**Maßabnahme**

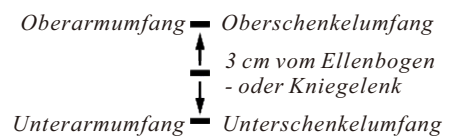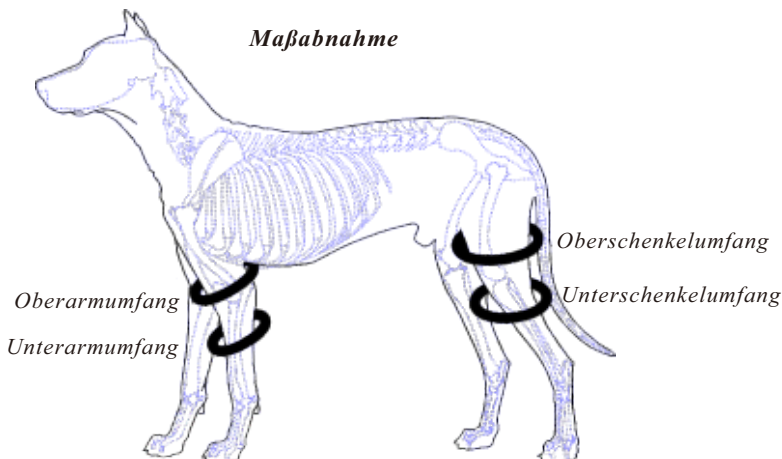



**Outdoor-Schutzstiefel**



- .Zum Schutz der Pfoten vor Verletzungen.
- .Abrieb- und rutschfeste Gummisohle sorgt für Beweglichkeit in allen Umgebungsbedingungen.
- .Thermo-Material, speziell versiegelt, Karpal-/Knöchelhöhe sorgt für optimale Wärme, wasserdicht und schmutzabweisend.
- .Optimale Passform durch Berücksichtigung der Besonderheiten der Pfote.
- .Verfügbar in verschiedenen Größen.
- .Durch reflektierende Streifen auch im Dunkeln gut sichtbar.
- .Verfügbar im Set bestehend aus 4 Stück.

Art.Nr.	Größe	Länge x -Breite
<i>kleine Hunde, Katzen</i>		
T-35032	XS	45 x 50 mm
T-35033	S	45 x 56 mm
T-35034	M	50 x 63 mm
T-35035	L	55 x 70 mm

Art.Nr.	Größe	Länge x -Breite
<i>mittelgroße Hunde</i>		
T-35052	S	60 x 77 mm
T-35053	M	65 x 84 mm
T-35054	L	70 x 90 mm
T-35055	XL	75 x 97 mm

Art.Nr.	Größe	Länge x -Breite
<i>große Hunde</i>		
T-35072	S	80 x 101 mm
T-35073	M	85 x 108 mm
T-35074	L	90 x 112 mm
T-35075	XL	95 x 119 mm



**Outdoor-Schuhe**




- .Zum Schutz der Pfoten vor Verletzungen.
- .Abrieb- und rutschfeste Gummisohle sorgt für Beweglichkeit in allen Umgebungsbedingungen.
- .Thermo-Material und spezielle Versiegelung sorgen für optimale Wärme, wasserdicht und schmutzabweisend.
- .Pfortengerechte Konturen sorgen für optimale Passform.
- .Verfügbar in verschiedenen Größen.
- .Durch reflektierende Streifen auch im Dunkeln gut sichtbar.
- .Verfügbar im Set bestehend aus 4 Stück.

Art.Nr.	Größe	Länge x -Breite
<i>kleine Hunde, Katzen</i>		
T-35132	XS	45 x 50 mm
T-35133	S	45 x 56 mm
T-35134	M	50 x 63 mm
T-35135	L	55 x 70 mm

Art.Nr.	Größe	Länge x -Breite
<i>mittelgroße Hunde</i>		
T-35152	S	60 x 77 mm
T-35153	M	65 x 84 mm
T-35154	L	70 x 90 mm
T-35155	XL	75 x 97 mm

Art.Nr.	Größe	Länge x -Breite
<i>große Hunde</i>		
T-35172	S	80 x 101 mm
T-35173	M	85 x 108 mm
T-35174	L	90 x 112 mm
T-35175	XL	95 x 119 mm

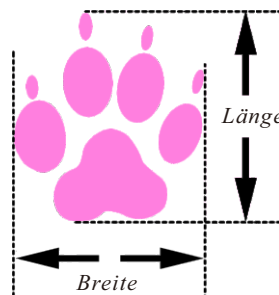





Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China



kleine Hunde



mittelgroße Hunde

## Hinterlauf-Rollstuhl



.Ermöglicht eine freie Beweglichkeit bei Hunden mit Hüftdysplasie, Arthritis, Hinterlaufparalyse, neurologischen oder Rückenmarksverletzungen.

.Zur Mobilisierung von Hunden mit Hinterlaufeinschränkungen. Ermöglicht eine freie Bewegung und einen natürlichen Gang.

.Der leichte und dennoch stabile Aluminiumrahmen ermöglicht Hunden das Laufen auf ebenen Wegen.

.Höhen- und längenverstellbar zur Anpassung an verschiedene Hundegrößen.

**.Achtung: Der Rollstuhl kann bei zu schnellem Laufen oder auf unebenen Wegen umkippen!**

Art.Nr.	Belastbarkeit	Körperlänge	Körperbreite	Höhe
<i>kleine Hunde</i>				
T-40013(kurzbeinig)	30kg	31-44.5cm	13-20cm	16-30cm
T-40015	30kg	31-44.5cm	13-20cm	18-33cm

Art.Nr.	Belastbarkeit	Körperlänge	Körperbreite	Höhe
<i>mittelgroße Hunde</i>				
T-40023(kurzbeinig)	40kg	41.5-66cm	20-27cm	23-48cm
T-40025	40kg	41.5-66cm	20-27cm	33-58cm




Halsgeschirr

Brustgeschirr (optional)

Bauchgeschirr

Beingeschirr

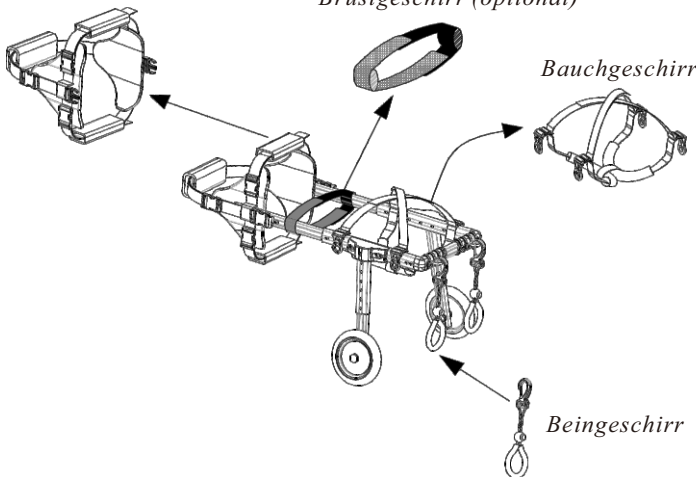

Alle Geschirre sind als Sets erhältlich.

1 Geschirrsset enthält:

1 x Halsgeschirr, 1 x Bauchgeschirr, 2 x Beingeschirr,  
1 x Brustgeschirr (optional)

Die Bestellnummern lauten wie folgt:

T-40013-050(kleine Hunde, kurzbeinig)

T-40015-050(kleine Hunde)

T-40023-050(mittelgroße Hunde, kurzbeinig)

T-40025-050(mittelgroße Hunde)

Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China



kleine Hunde



mittelgroße Hunde

## Rollstuhl (4 Räder)



.Ermöglicht eine freie Beweglichkeit bei Hunden mit Schulter- oder Hüftdysplasie, Osteoarthritis, Bandscheibenvorfall, Vorderlauf- oder Hinterlaufparalyse, neurologischen oder Rückenmarksverletzungen. Unterstützung von Hunden in der postoperativen Rehabilitationsphase. Vorbeugung von Muskelschwund.

.Unterstützung von Hunden mit Bewegungseinschränkungen an Vorder- oder Hinterläufen. Ermöglicht eine freie Bewegung und einen natürlichen Gang.

.Der leichte und dennoch stabile Aluminiumrahmen ermöglicht Hunden das Laufen auf ebenen Wegen.

.Höhen- und längenverstellbar zur Anpassung an verschiedene Hundegrößen.

**.Achtung: Der Rollstuhl kann bei zu schnellem Laufen oder auf unebenen Wegen umkippen!**

Art.Nr.	Belastbarkeit	Körperlänge	Körperbreite	Höhe
<i>kleine Hunde</i>				
T-40115	30kg	31-44.5cm	13-20cm	18-33cm


Art.Nr.	Belastbarkeit	Körperlänge	Körperbreite	Höhe
<i>mittelgroße Hunde</i>				
T-40125	40kg	41.5-66cm	20-27cm	33-58cm



Halsgeschirr  
(mit Kinnstütze)

Brustgeschirr (optional)

Bauchgeschirr

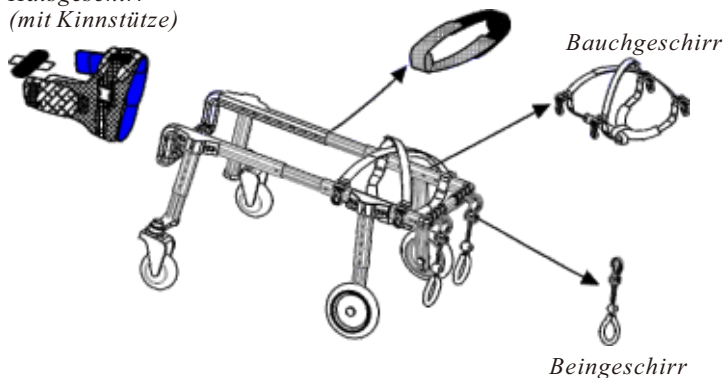

Alle Geschirre sind als Sets erhältlich.

1 Geschirrsset enthält:

Halsgeschirr (mit Kinnstütze) x 1, Bauchgeschirr x 1,  
Beingeschirr x 2, Brustgeschirr (optional) x 1

Die Bestellnummern lauten wie folgt:

T-40115-050(kleine Hunde)

T-40125-050(mittelgroße Hunde)

Patentiert in Taiwan  
Patentiert in China



kleine Hunde



mittelgroße Hunde

## Vorderlauf-Rollstuhl



- .Für Hunde mit verletzten Vorderläufen, Amputationen, Fehlbildungen und Mobilitätseinschränkungen aufgrund von Hirnschäden.
- .Der Rollstuhl ersetzt die Vorderläufe. Auf diese Weise wird Schäden an Wirbelsäule und Hinterläufen vorgebeugt.
- .Das besondere Design ermöglicht dem Hund das Sitzen oder Ablegen auf den Boden.
- .Der leichte und dennoch stabile Aluminiumrahmen ermöglicht Hunden das Laufen auf ebenen Wegen.
- .Höhen- und längenverstellbar zur Anpassung an verschiedene Hundegrößen.
- .Achtung: Der Rollstuhl kann bei zu schnellem Laufen oder auf unebenen Wegen umkippen!**


Art.Nr.	Belastbarkeit	Körperlänge	Körperbreite	Höhe
<i>kleine Hunde</i>				
T-40213(kurzbeinig)	30kg	31-44.5cm	13-20cm	16-30cm
T-40215	30kg	31-44.5cm	13-20cm	18-33cm

Art.Nr.	Belastbarkeit	Körperlänge	Körperbreite	Höhe
<i>mittelgroße Hunde</i>				
T-40223(kurzbeinig)	40kg	41.5-66cm	20-27cm	23-48cm
T-40225	40kg	41.5-66cm	20-27cm	33-58cm



Halsgeschirr  
(mit Kinnstütze)

Brustgeschirr (optional)

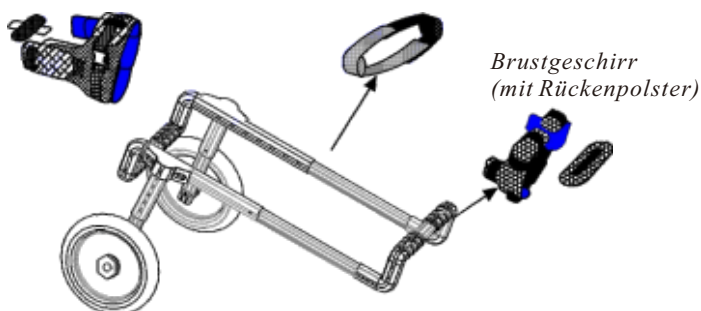

Alle Geschirre sind als Sets erhältlich.

1 Geschirrsset enthält:

- Halsgeschirr (mit Kinnstütze) x 1,
- Brustgeschirr (mit Rückenpolster) x 1,
- Brustgeschirr (optional) x 1

Die Bestellnummern lauten wie folgt:

- T-40213-050(kleine Hunde, kurzbeinig)
- T-40215-050(kleine Hunde)
- T-40223-050(mittelgroße Hunde, kurzbeinig)
- T-40225-050(mittelgroße Hunde)






**Physio-Rolle**



- .Stärkung des Selbstvertrauens.
- .Verbesserung des Gesundheitszustands.
- .Stärkung der Koordinationsfähigkeit.
- .Kraftaufbau.
- .Für eine bessere Körperform.
- .Zur Stärkung des Gleichgewichtssinns und des Körperbewusstseins.
- .Hilft dem Tier beim unabhängigen Stand.
- .Baut psychologische Ängste ab.
- .Tier kann durch Leckerlis zum Üben animiert werden.
- .10 bis 20 Minuten pro Tag oder nach Anweisung des Arztes.

Art.Nr.	Größe(Länge x Breite)
T-47100	40 x 15cm
T-47101	40 x 20cm
T-47102	50 x 25cm
T-47103	60 x 30cm
T-47104	70 x 35cm
T-47105	80 x 40cm
T-47106	90 x 45cm

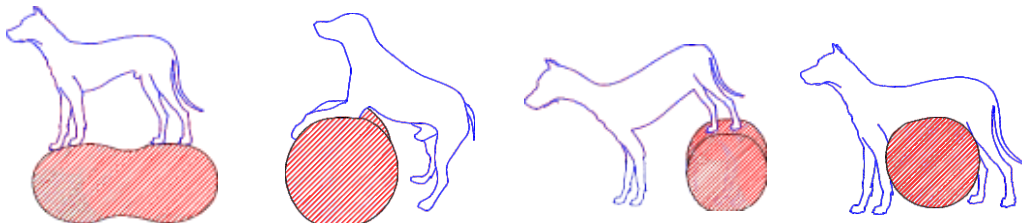


**Physio-Ball**



- .Stärkung des Selbstvertrauens.
- .Verbesserung des Gesundheitszustands.
- .Stärkung der Koordinationsfähigkeit.
- .Kraftaufbau.
- .Stärkung des Gleichgewichtssinns.
- .Hilfsmittel für die Rehabilitation und Physiotherapie.
- .Ermöglicht Übungen bei limitierter Geh- oder Stehfähigkeit.
- .Baut psychologische Ängste ab.
- .Tier kann durch Leckerlis zum Üben animiert werden.
- .10 bis 20 Minuten pro Tag oder nach Anweisung des Arztes.

Art.Nr.	Durchmesser
T-47111	45cm
T-47112	55cm
T-47113	65cm
T-47114	75cm
T-47115	85cm

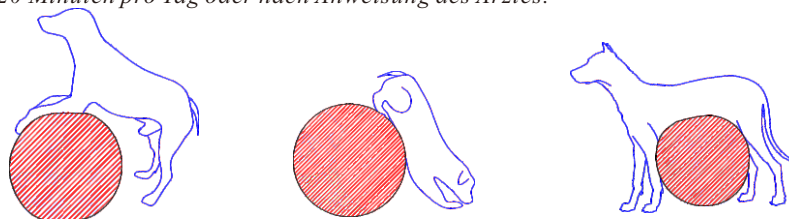



**Balance-Kissen**



- .Perfekt für Balance-Übungen im Frühstadium der Reha.
- .Für die allgemeine Körperfitness.
- .Für den Einsatz in der Reha.
- .Zur Stärkung des Zentrums und der Extremitäten.
- .Zur Stärkung des Gleichgewichtssinns und des Körperbewusstseins.
- .Strukturierte Oberfläche stimuliert die Nerven.
- .10 bis 20 Minuten pro Tag oder nach Anweisung des Arztes.

Art.Nr.	Durchmesser
T-47120	33cm

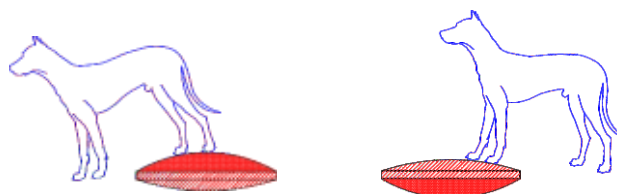

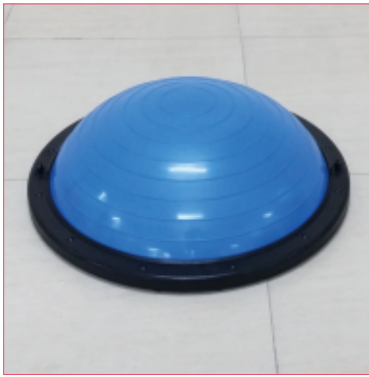


**Balance-Trainer**



- .Stärkung des Selbstvertrauens.
- .Verbesserung des Gesundheitszustands.
- .Konzentrierte Aufmerksamkeit und Fokus.
- .Aufbau der Muskelkraft.
- .Zur Stärkung des Gleichgewichtssinns und des Körperbewusstseins.
- .Verbesserung der Tragefähigkeit der Extremitäten.
- .10 bis 20 Minuten pro Tag oder nach Anweisung des Arztes.

Art.Nr. Durchmesser  
T-47130 60cm

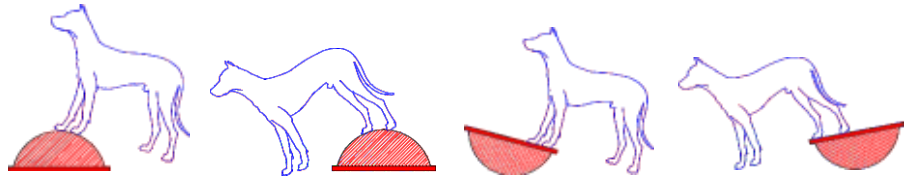


**Pfoten-Trainer**



- .Verbesserung des Körperbewusstseins, Koordinationstraining.
- .Verbesserung der dynamischen Balance.
- .Verbesserung der Beinstabilität.
- .Flache Seite nach unten für Stabilitätstraining, flache Seite oben für Balancetraining.
- .Noppenoberfläche stimuliert die Nerven.
- .Baut psychologische Ängste ab.
- .Tier kann durch Leckerlis zum Üben animiert werden.
- .10 bis 20 Minuten pro Tag oder nach Anweisung des Arztes.

Art.Nr. Durchmesser  
T-47140 16cm

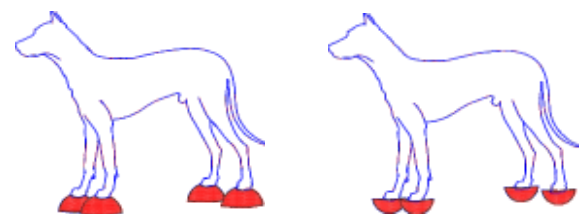

Art.Nr.  
T-48110

**Tragbare Fußpumpe**

.Zum Aufblasen von Physio-Rolle, Physio-Ball und Balance-Trainer.



Art.Nr.  
T-48120

**Handpumpe**

.Zum Aufblasen des Balance-Kissens und der Pfoten-Trainer.



## Rollbrett

- .Stärkung des Selbstvertrauens.
- .Stärkung des Körperbewusstseins.
- .Stärkung des Gleichgewichtssinns.
- .Trainieren und Stärken des gesamten Körpers.
- .Vier Universalräder an der Unterseite ermöglichen eine Bewegung in alle Richtungen.
- .Aus Holz mit rutschfester Oberfläche.
- .Baut psychologische Ängste ab.
- .Tier kann durch Leckerlis zum Üben animiert werden.
- .10 bis 20 Minuten pro Tag oder nach Anweisung des Arztes.
- .**Hinweis: Bitte verwenden Sie das Brett nur auf ebenen Flächen. Unebene Flächen können Schäden an den Rollen verursachen.**

Art.Nr.	Größe (Länge x Breite x Höhe)
T-47155	80 x 60 x 8cm
T-47156	60 x 40 x 8cm



## Schaukelbrett

- .Stärkung des Selbstvertrauens.
- .Stärkung des Körperbewusstseins.
- .Stärkung des Gleichgewichtssinns.
- .Trainieren und Stärken des gesamten Körpers.
- .Aus Holz mit rutschfester Oberfläche.
- .Funktioniert wie eine Wippe mit einem Stab in der Mitte.
- .Baut psychologische Ängste ab.
- .Tier kann durch Leckerlis zum Üben animiert werden.
- .10 bis 20 Minuten pro Tag oder nach Anweisung des Arztes.
- .**Hinweis: Bitte verwenden Sie das Brett nur auf ebenen Flächen.**

Art.Nr.	Größe (Länge x Breite x Höhe)
T-47165	80 x 60 x 8cm
T-47166	60 x 40 x 8cm



## Rundes Schaukelbrett

- .Lässt sich um 360 Grad drehen.
- .Verbessert den Gleichgewichtssinn in alle Richtungen.
- .Stärkung des Körperbewusstseins.
- .Aus Holz mit rutschfester Oberfläche.
- .Trainieren und Stärken des gesamten Körpers.
- .Aus Holz mit rutschfester Oberfläche.
- .Rund mit einem Drehpunkt in der Mitte.
- .Baut psychologische Ängste ab.
- .Tier kann durch Leckerlis zum Üben animiert werden.
- .10 bis 20 Minuten pro Tag oder nach Anweisung des Arztes.
- .**Hinweis: Bitte verwenden Sie das Brett nur auf ebenen Flächen.**

Art.Nr.	Größe (Durchmesser x Höhe)
T-47175	Φ 60 x 8cm
T-47176	Φ 80 x 8cm




gerade Laufen oder Springen



S-Laufen oder Springen



S-Laufen

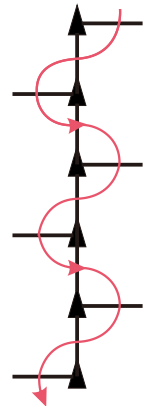

Art.Nr.  
T-47180

**Agility-Kit**



- .Agility Trainings-Kit.
- .Verbesserung der Gangart und der Agilität.
- .Verbesserung der Koordination, Stärkung des Gleichgewichtssinns und des Körperbewusstseins.
- .Verbesserung der Herz-Lungen-Suffizienz.
- .In drei Höhen einstellbar.
- .Die Geräte können zu unterschiedlichen Übungen zusammengestellt werden.
- .Zunächst langsam beginnen und dann schneller werden.
- .10 bis 205 Minuten pro Tag oder nach Anweisung des Arztes.
- .Leicht und mühelos zu tragen.



**Trainingsgeschirr**



- .Bewegungseinschränkend.
- .Unterstützt die wichtigsten Stellungen.
- .Hilft dem Tier bei der Bewegung stabil zu bleiben.
- .Unterstützt das Tier bei der Auf- und Abwärtsbewegung.
- .Zur Vorbeugung von Verletzungen.
- .Gute Passform durch einstellbaren, stark belastbaren Gurt. Der Brustgurt sorgt für zusätzliche Sicherheit.



**Trainingsgeschirr**



- .Bewegungseinschränkend.
- .Unterstützt die wichtigsten Stellungen.
- .Hilft dem Tier bei der Bewegung stabil zu bleiben.
- .Unterstützt das Tier bei der Auf- und Abwärtsbewegung.
- .Zur Vorbeugung von Verletzungen.
- .Gute Passform durch einstellbaren, stark belastbaren Gurt. Der Brustgurt sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Tiergröße
T-47503	S	30-55cm	kleine Hunde, Katzen
T-47505	M	55-87cm	mittelgroße Hunde
T-47507	L	87-110cm	große Hunde

Art.Nr.	Größe	Brustumfang	Tiergröße
T-47513	S	30-55cm	kleine Hunde, Katzen
T-47515	M	55-87cm	mittelgroße Hunde
T-47517	L	87-110cm	große Hunde









### Fliegenhaube

.Zum Schutz der Ohren vor Insekten o.ä. beim Ausritt.  
.Luftdurchlässiges Maschengewebe.

Art.Nr.	Größe
T-50000	UNIV



### Thermo-Halskrause

.Zum Warmhalten des Halses.  
.Mit drei einstellbaren Schnallen für eng anliegenden Sitz.  
.Speziell für die Halskontur des Pferdes entwickelt.

Art.Nr.	Größe	Kronenlänge	Halsumfang oben	Halsumfang unten
T-55003	S	27"-31"	24"-30"	26"-36"
T-55005	M	31"-35"	30"-36"	32"-42"
T-55007	L	35"-39"	36"-46"	38"-48"



### Wasserdichte Körperdecke

.Zum Warm- und Trockenhalten des Körpers.  
.Optimale Wasserdichte.  
.Zwei Schnallen an der Vorderseite und zwei Sattelturte sorgen für eng anliegenden Sitz.

Art.Nr.	Länge x Breite
T-60011	68" x 32"
T-60012	70" x 32"
T-60013	72" x 33"
T-60014	74" x 33"
T-60015	76" x 33"
T-60016	78" x 34"
T-60017	80" x 35-1/2"
T-60018	82" x 35-1/2"
T-60019	84" x 35-1/2"



### Thermo-Körperdecke

.Zum Warm- und Trockenhalten des Körpers.  
.Zwei Schnallen an der Vorderseite und zwei Sattelturte sorgen für eng anliegenden Sitz.  
.Vorderbeine frei beweglich durch Halböffnung vorn.  
.Angenehm zu tragen durch Fleecefutter am Hals.

Art.Nr.	Länge x Breite
T-60021	68" x 32"
T-60022	70" x 32"
T-60023	72" x 33"
T-60024	74" x 33"
T-60025	76" x 33"
T-60026	78" x 34"
T-60027	80" x 35-1/2"
T-60028	82" x 35-1/2"
T-60029	84" x 35-1/2"



### Fleece-Rückenpolster

.Vermindert den Druck auf den Pferderücken und sorgt für komfortablen Sitz des Reiters.  
.Gewichtsverteilung des Reiters durch das an die Rückenkontur angepasste Design.  
.Angenehm zu tragen durch Fleecefutter am Hals.

Art.Nr.	Größe	Länge x Breite
T-61013	S	23" x 22"
T-61015	M	26" x 25"
T-61017	L	32" x 31"



### Therapeutische Sprunggelenkskompressur

.Zum Schutz von Fibula, Tarsus und Metatarsus.  
.Aus Neopren mit extradicker, widerstandsfähiger Außenschicht zum Schutz des Sprunggelenks.  
.Vermindert Schwellungen und weicht Gallen auf oder beseitigt sie vollständig.  
.Durch drei einstellbare Klettverschlüsse wird die Kompressur nah am Bein gehalten.  
.Paarweise verfügbar.

Art.Nr.	Größe	Oberer Umfang	Unterer Umfang
T-70103	S	14"	11"
T-70105	M	15"	12"
T-70107	L	16"	13"





### Stall-Transportgamasche hinten



- .Für den Einsatz an Metakarpalgelenk und Fessel des Hinterlaufs.*
- .Bietet optimalen Schutz vor Verletzungen der Fessel.*
- .Wärmend, weich und atmungsaktiv. Durch Klettverschluss leicht zu schließen.*
- .Paarweise verfügbar.*

Art.Nr.	Größe	Höhe	Umfang oben	Unterer Umfang
T-80073	S	50cm	34cm	32cm
T-80075	M	55cm	38cm	36cm
T-80077	L	60cm	42cm	40cm
T-80078	XL	65cm	46cm	44cm



### Streichkappen vorn



- .Robuste Kunststoffschale sorgt für einen besseren Schutz der Metakarpalknochen, Fessel und Phalangen.*
- .Weich gefüttert zum Warmhalten.*
- .Anatomisch geformt mit Klettverschlüssen zum Anpassen und für sicheren Halt.*
- .Paarweise verfügbar.*

Art.Nr.	Größe	Höhe x Breite
T-80113	S	11" x 9-1/2"
T-80115	M	11" x 10-1/2"
T-80117	L	11" x 11-1/2"



### Streichkappe hinten



- .Robuste Kunststoffschale sorgt für einen besseren Schutz der Metakarpalknochen, Fessel und Phalangen.*
- .Weich gefüttert zum Warmhalten.*
- .Anatomisch geformt mit Klettverschlüssen zum Anpassen und für sicheren Halt.*
- .Paarweise verfügbar.*

Art.Nr.	Größe	Höhe x Breite
T-80133	S	8-1/2" x 9-1/2"
T-80135	M	8-1/2" x 10-1/2"
T-80137	L	8-1/2" x 11-1/2"



### Fesselkopfgamaschen



- .Zum Schutz der Fessel und der Metakarpal- bzw. Metatarsalknochen.*
- .Durch Klettverschlüsse an die individuellen Konturen des Laufs anpassbar, sicherer Halt.*
- .Paarweise verfügbar.*

Art.Nr.	Größe	Höhe	Umfang
T-80313	S	9-1/4"	9"
T-80315	M	10"	9-3/4"
T-80317	L	10-3/4"	10-1/2"
T-80318	XL	11-1/2"	11-1/4"



### Wärmegamaschen



- .Zum Schutz der Fessel und der Metakarpal- bzw. Metatarsalknochen.*
- .Hält warm und lässt eine schmerzlindernde Wärme entstehen.*
- .Durch drei einstellbare Klettverschlüsse wird die Gamasche nah am Bein gehalten.*
- .Paarweise verfügbar.*

Art.Nr.	Größe	Höhe	Oberer Umfang	Unterer Umfang
T-80413	S	14"	17-1/2"	14"
T-80415	M	14"	18-1/2"	14"
T-80417	L	14"	19-1/2"	15"



### Hufglocken



- .Neopren mit fester Außenschale bietet robusten, zielgerichteten Schutz für Pferdehufe.*
- .Weiche abgerundete Ränder verhindern Abrasionen.*
- .Zwei Klettbänder auf der Rückseite sorgen für sicheren Halt.*
- .Paarweise verfügbar.*

Art.Nr.	Größe	Höhe	Oberer Umfang
T-85013	S	4"	9"~10"
T-85017	L	4-1/2"	10"~11"



### Streichkappe vorn

- .Für den Einsatz an Metakarpalgelenk und Fessel des Vorderlaufs.
- .Schlagfeste Außenschale für optimalen Schutz des unteren Vorderlaufs, verhindert Abrasionen.
- .Neoprengefüttert mit Polster aus Memory Foam für bessere Stoßdämpfung.
- .Verstellbare Verschlüsse sorgen dafür, dass die Gamaschen individuell angepasst werden können.
- .Paarweise verfügbar.

Art.Nr.	Größe	Höhe	Fesselumfang
T-80200	UNIV	8-3/4"	9"~12"
T-80210	UNIV	8-3/4"	9"~12"



### Streichkappe vorn

- .Für den Einsatz an Metakarpalgelenk und Fessel des Vorderlaufs.
- .Schlagfeste Außenschale für optimalen Schutz des unteren Laufs, verhindert Abrasionen;
- .Sehr widerstandsfähiges Material mit extra weichen Zonen oben und unten zur Vermeidung von Druckstellen.
- .Neoprengefüttert mit Polster aus Memory Foam für bessere Stoßdämpfung.
- .Verstellbare Verschlüsse sorgen dafür, dass die Gamaschen individuell angepasst werden können.
- .Paarweise verfügbar.

Art.Nr.	Größe	Höhe	Fesselumfang
T-80220	UNIV	8-3/4"	9"~12"
T-80230	UNIV	8-3/4"	9"~12"



### Streichkappe hinten

- .Für den Einsatz an Metakarpalgelenk und Fessel des Hinterlaufs.
- .Schlagfeste Außenschale für optimalen Schutz des unteren Vorderlaufs, verhindert Abrasionen.
- .Neoprengefüttert mit Polster aus Memory Foam für bessere Stoßdämpfung.
- .Verstellbare Verschlüsse sorgen dafür, dass die Gamaschen individuell angepasst werden können.
- .Paarweise verfügbar.

Art.Nr.	Größe	Höhe	Fesselumfang
T-80250	UNIV	6-1/2"	9-1/2"~12-1/2"
T-80260	UNIV	6-1/2"	9-1/2"~12-1/2"




### Streichkappe hinten

- .Für den Einsatz an Metakarpalgelenk und Fessel des Hinterlaufs.
- .Schlagfeste Außenschale für optimalen Schutz des unteren Laufs, verhindert Abrasionen;
- .Sehr widerstandsfähiges Material mit extra weichen Zonen oben und unten zur Vermeidung von Druckstellen.
- .Neoprengefüttert mit Polster aus Memory Foam für bessere Stoßdämpfung.
- .Verstellbare Verschlüsse sorgen dafür, dass die Gamaschen individuell angepasst werden können.
- .Paarweise verfügbar.

Art.Nr.	Größe	Höhe	Fesselumfang
T-80270	UNIV	6-1/2"	9-1/2"~12-1/2"
T-80280	UNIV	6-1/2"	9-1/2"~12-1/2"

## *Einkaufs- und Gebrauchsinformationen für Tierärzte*

- 1. Bitte vermessen Sie die Patienten entsprechend der Abbildungen und wählen Sie die entsprechende Größe anhand der Größentabellen im Katalog.*
- 2. Bei unseren Produkten handelt es sich nicht um Maßanfertigungen. Sollte der gewählte Artikel Ihrem Patienten nicht passen, senden Sie diesen bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Produkts vollständig und in einwandfreiem Zustand an uns zurück. Nach Wareneingang erhalten Sie eine Gutschrift über den zurückgesandten Artikel. Die Versandkosten werden nicht erstattet. Bei Nichtbeachten übernehmen wir keine Gewährleistung. Die Rechnungsstellung erfolgt gleichzeitig mit Ihrer Kaufentscheidung.*
- 3. Unsere Produkte sind für den Einsatz nach Abklingen von Entzündungen und Schwellungen an Wunden oder Verstauchungen bestimmt. Die medizinische Beurteilung über die Eignung für die gewünschte Behandlung obliegt jedoch dem behandelnden Arzt. Während des Einsatzes sollten Wunden und Verstauchungen besonders aufmerksam beobachtet werden.*
- 4. Die Eigentümer der Patienten sind über die Warnhinweise im Katalog zu informieren und anzuhalten, beim Einsatz der Produkte besondere Vorsicht walten zu lassen.*
- 5. Bitte weisen Sie die Eigentümer darauf hin, die Produkte entsprechend den Gebrauchsinformationen zu verwenden.*
- 6. Die Patienten sollten nach der ersten Woche der Verwendung wieder vorstellig werden.*
  - A. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Patient dem Produkt ängstlich gegenübersteht und es nur widerwillig akzeptiert. Es ist daher viel Geduld und eine gewisse Eingewöhnungsphase erforderlich.*
  - B. Der Einsatz von Leckerlis zur Belohnung in der Anfangsphase führt in der Regel zum Erfolg.*
  - C. Die Einsatzzeit kann zu Beginn stufenweise ausgedehnt oder vertieft werden.*
  - D. Wann die Produkte verwendet werden sollen und ob sie auch im Ruhezustand getragen werden sollen, obliegt Ihrer fachärztlichen Beurteilung.*
  - E. Stellen Sie sicher, dass die Produkte in der korrekten Position verwendet werden.*
- 7. Verbesserungsvorschläge zu Aufbau und Funktion unserer Produkte nehmen wir jederzeit gerne entgegen.*
- 8. Services für Tierbesitzer bieten wir nicht an. Die Verkaufspreise für Endkunden sind unverbindlich und lediglich als Anhaltspunkt für Sie gedacht.*

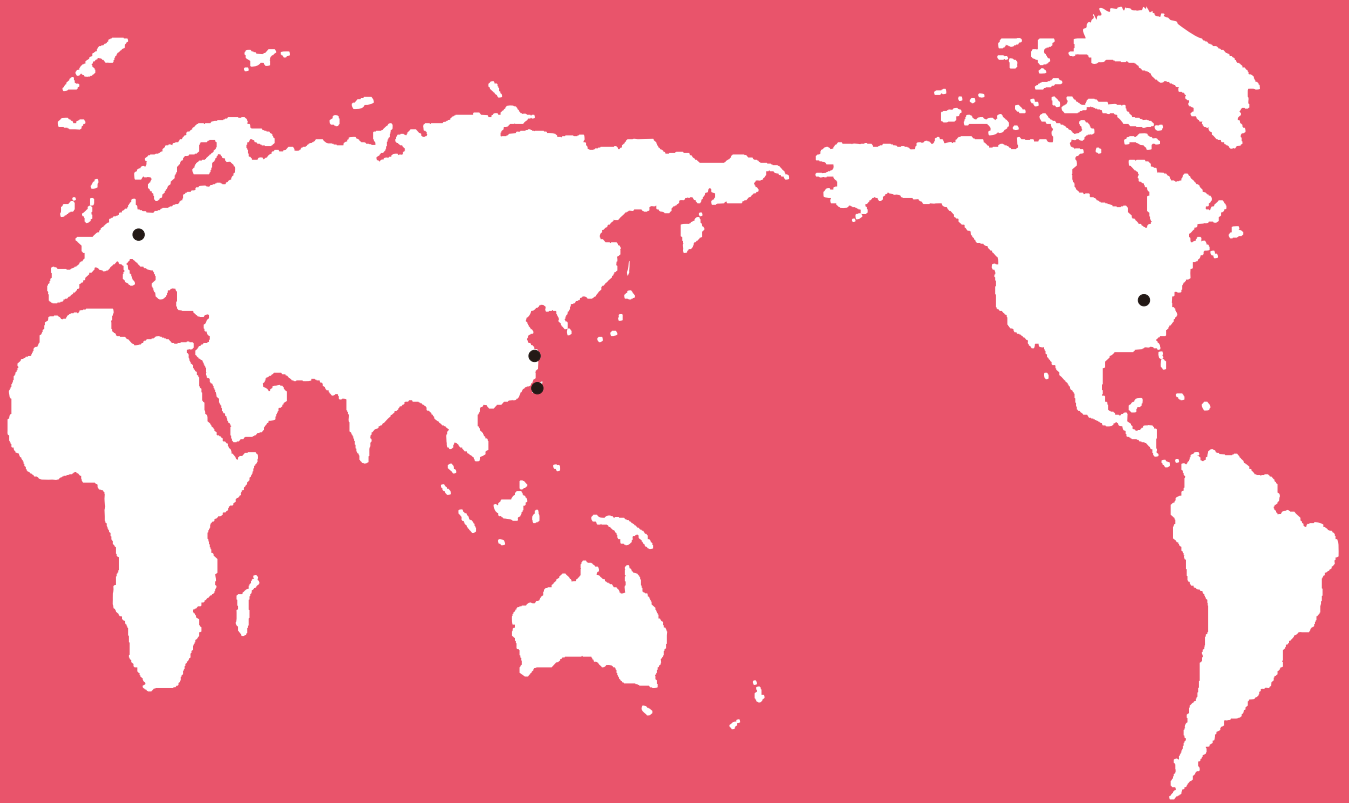

**Vertrieb International:**

**Taiwan:**

*Dobest Medical International Trading Co., Ltd.*

*Tel: +886-6-2682292*

*E-Mail: sales@dbmco.com.tw*

**China:**

*Medi Trading (Shanghai) Co., Ltd.*

*Tel: +86-21-39527088*

*Mobile phone: +86-17351242850*

*E-Mail: export@medioem.com*

**America:**

*Triple Inc.*

*Tel: 1-574-2671450*

*E-Mail: tripleinc@kconline.com*

**Europa:**

*inocare Medical GmbH*

*Tel: +49 6226 7873 223*

*E-Mail: animal@inocare.de*



**Triad Orthopedic Products Industrial Co., Ltd.**

*Tel: +886-6-2682277*

*Email: export@deltaigroup.com.tw*

*Website: www.com.triad-orthopedic.com*

*Add: An Ping Industrial Park, Tainan, Taiwan*